

PROGENT

Intensive cleaner

INDICATIONS

Protein remover and disinfecting solution for all rigid gas permeable lenses.

DIRECTIONS

- 1 Clean your lenses thoroughly with regular cleaning solution.
Place the lenses into vial caps in its appropriate right or left holder : R = right, L = left, for intensive cleaning.
- 2 Open both doses carefully, by holding upright. Gently and slowly twist the tip, without touching the opening or squeezing the dose.
- 3 Insert the tip of dose inside the vial and fill slowly, first with A solution, then B solution, taking care not to spill any solution.
- 4 Close the vial cap securely gently shake it a few times.
- 5 Soak the lenses in Progrent for 30 minutes maximum.
- 6 Remove the vial cap, empty its content. Rinse the lenses in the holder thoroughly with the regular rinsing solution.
- 7 Then clean the lenses thoroughly with the regular solution and rinse them. The lenses may then be worn or stored in the storage case.
- 8 Rinse the vial and its cap thoroughly with the rinsing and regular and let them air dry.

WARNINGS

- Do not apply Progrent to the eyes, the nose and the mouth. In case of misuse, rinse immediately your eyes thoroughly with water and consult your eye care practitioner.
- It is essential to rinse the lenses abundantly with a rinsing and regular solution after soaking them in Progrent solution.
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

PRECAUTIONS

- Do not soak lenses in Progrent for over 30 minutes. Lenses might discolour. However this will not affect their quality.
- Important: do not swallow.
- To be used weekly for daily use (or on removing extended wear lenses).
- Do not use Progrent A and B solutions separately.
- Single use doses. Discard the solution and the doses after each use.
- Store at room temperature (15-25°C).
- Avoid contact with the skin and do not spill Progrent on your clothes. It may bleach them.
- Do not use Progrent A and B after expiry date printed on the single dose.
- Store out of direct sunlight.
- Do not use Progrent A and B doses if they are damaged.
- Consult your eye care professional before using any medication with contact lenses or before changing solution.

CONTRA-INDICATIONS

- Do not use for soft lenses.
- Do not use if allergic to one of the ingredients.

ADVERSE REACTIONS

If you experience persistent discomfort or irritation, remove your lenses, stop using the product and consult your eye care professional.
Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

CONTACT LENS DISINFECTION


Progrent acts as a disinfectant for microorganisms (bacteria, moulds, viruses, amoebae) in just 5 minutes of soaking.

PACKAGING

Progrent is available in boxes of 5 pairs of Progrent A and B with one Progrent vial and starter kit.

COMPOSITION

Solution A : NaClO 20.3 mg, purified water ad 5ml/dose.
Solution B : KBr 30.75 mg, purified water ad 5ml/dose.

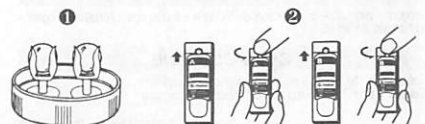

PROGENT

Intensivreiniger

INDIKATIONEN

Proteinentferner und Desinfektionslösung für alle formstabilen sauerstoffdurchlässigen Kontaktlinsen.

ANLEITUNG

- 1 Reinigen Sie Ihre Kontaktlinsen sorgfältig mit der Reinigungslösung für die tägliche Anwendung.
Geben Sie die Kontaktlinsen zur Intensivreinigung einzeln in die Linsenhalterungen im Deckel des Behälters: R = rechts, L = links.
- 2 Öffnen Sie durch Drehen der Spitze vorsichtig je eine Ampulle A und eine Ampulle B. Üben Sie hierbei keinen Druck auf die Ampulle aus, um ein Verschütten der Flüssigkeiten zu vermeiden.
- 3 Füllen Sie den Inhalt beider Ampullen in den dafür vorgesehenen Reinigungsbehälter. Halten Sie dafür den Abstand zwischen den Ampullen und dem Behälter so gering wie möglich, um keine Flüssigkeit zu verschütten.
- 4 Verschließen Sie den Behälter und schütteln Sie ihn einige Male vorsichtig.
- 5 Lassen Sie die Kontaktlinsen 30 Minuten in der Lösung (nicht länger).
- 6 Nehmen Sie den Deckel vom Behälter und entsorgen Sie die gebrauchte Flüssigkeit. Spülen Sie die Kontaktlinsen gründlich mit geeigneter Abspülung.
- 7 Danach reinigen Sie die Kontaktlinsen wie bei der täglichen Pflege manuell und spülen Sie die Linsen nochmals ab. Die Kontaktlinsen können jetzt getragen, bzw. im Aufbewahrungsbehälter aufbewahrt werden.
- 8 Spülen Sie den Behälter und den Deckel gut mit geeigneter Abspülung ab und lassen Sie beides an der Luft trocknen.

WARNHINWEISE

- Nicht in die Augen, in die Nase und in den Mund geben. Bei direktem Kontakt der Lösung mit dem Auge, das Auge gründlich mit Wasser ausspülen, unbedingt Ihren Augenarzt aufsuchen.
- Das gründliche Abspülen der Kontaktlinsen mit geeigneter Abspülung ist eine unerlässliche Phase nach der Anwendung mit Progrent.
- VON KINDERN FERNHALTEN

BESONDERE HINWEISE

- Kontaktlinsen nicht länger als 30 Minuten in Progrent lagern. Nach 30 Minuten können sich die Kontaktlinsen verfärben, dies hat jedoch keine Einfluss auf die Kontaktlinsenqualität.
- Wichtig: Flüssigkeit nicht schlucken.
- Einmal wöchentlich bei täglich getragenen Linsen, bei verlängertem Tragen nach jeder Trageperiode anwenden.
- Die Lösung A und B nicht einzeln anwenden.
- Ampullen nur zum Einmalgebrauch und beide Ampullen. Nach jeder Verwendung entsorgen Sie die gebrauchte Flüssigkeit und beide Ampullen.
- Bei Raumtemperatur aufbewahren (15-25°C).
- Kontakt mit Haut und Kleidung vermeiden (Bleichwirkung).
- Nach Ablauf des Verfalldatums (siehe Verpackung) nicht mehr verwenden.
- Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Die Ampullen A und B nicht verwenden wenn sie beschädigt sind.
- Vor der Einnahme, Anwendung oder Änderung von Arzneimitteln für die Augen müssen Sie mit Ihrem Augenarzt oder Optiker Rücksprache halten.

KONTRAINDIKATIONEN

- Nicht für weiche Kontaktlinsen verwenden.
- Nicht bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe anwenden.

NEBENWIRKUNGEN

Bei Irritationen oder Unverträglichkeit, Kontaktlinsen vom Auge nehmen, die Anwendung dieses Produkts aussetzen und mit dem Augenarzt oder Optiker Rücksprache halten.

Sämtliche schweren Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt sind dem Hersteller unter der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates mitzuteilen, in welchem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist.

DESINFEKTION VON KONTAKTLINSEN

Progrent wirkt desinfizierend auf Mikroorganismen (Bakterien, Pilze, Viren, Amöben) innerhalb von 5 Minuten.

VERPACKUNGSGRÖSSE

Progrent ist als Verpackungseinheit für 5 Reinigungen mit einem Progrent Behälter und als Starter Kit.

ZUSAMMENSETZUNG

Lösung A : NaClO 20.3 mg, aqua dest. ad 5ml/Ampulle.
Lösung B : KBr 30.75 mg, aqua dest. ad 5ml/Ampulle.



PROGENT

Intensiefreiniger

INDICATIONS (GEBRUIK)

Proteïneverwijderende en desinfecterende vloeistof voor alle vormvaste contactlenzen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1 Reinig de lenzen met uw dagelijkse lensvloeistof.
Voor intensiefreining, plaats de lenzen in de lenshouders op de deksel van de lenshouder : R = Rechts, L = Links.
- 2 Houd de ampullen rechtop en open ze voorzichtig. Draai langzaam het dopje los, zonder de opening van de ampul aan te raken of de ampul in te drukken.
- 3 Leeg de ampul voorzichtig in de lenshouder, eerst oplossing A, dan oplossing B. Zorg ervoor geen vloeistof te morsen.
- 4 Sluit de lenshouder en schud daarna de houder een paar keer voorzichtig.
- 5 Laat de lenzen maximaal 30 minuten in de vloeistof staan.
- 6 Open de deksel van de lenshouder en gooi de vloeistof weg. Spoel de lenzen grondig na met een aspoelvloeistof.
- 7 Reinig de lenzen vervolgens met uw dagelijkse lensvloeistof en spoel de lens nogmaals af. De lenzen nu klaar om ingezet te worden of om bewaard te worden.
- 8 Spoel de gebruikte lenshouder (potje + deksel) om met een lensvloeistof en laat deze drogen.

WAARSCHUWINGEN

- Niet in de ogen, in de neus of in de mond druppelen. Indien er per ongeluk vloeistof in de ogen terecht is gekomen, dan onmiddellijk contact opnemen met uw contactlensspecialist.
- Het is absoluut noodzakelijk om na intensieve reiniging met Progrent oplossing de lenzen zorgvuldig af te spoelen met een aspoelvloeistof.
- BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

VOORZORGSMAATREGELEN

- De lenzen mogen niet langer dan 30 minuten in de Progrent reinigingsvloeistof staan. Langere tijd test de kwaliteit van de lenzen niet aan, maar zou wel verkleuring van de lenzen tot gevolg kunnen hebben.
- Belangrijk: niet innemen.
- Wekelijks gebruiken indien de lenzen alleen overdag worden gedragen (en bij uithalen van permanent gedragen lenzen).
- De ampullen A en B niet afzonderlijk gebruiken.
- De inhoud is voor eenmalig gebruik, na elk gebruik de ampullen en de vloeistof weggooien.
- Bewaren en gebruiken bij kamertemperatuur (15-25°C).
- Vermijd contact met de huid en aanraking met kleding: risico op vlekking.
- Gebruik de ampullen niet meer na de vervaldatum.
- Niet in direct zonlicht plaatsen.
- Gebruik geen Progrent A- en B-doses als ze beschadigd zijn.
- Raadpleeg uw arts of contactlensspecialist voordat u oorgedragene in combinatie met contactlenzen inneemt of verwisselt.

NIET TE GEBRUIKEN BIJ

- Zachte lenzen.
- Bekende allergische reactie(s) voor één van de bestanddelen.

BIJWERKINGEN

Als u last heeft van blijvend ongemak of irritatie, haal de lenzen uit, gebruik dit product niet langer en raadpleeg uw contactlensspecialist.
Ernstige incidenten die verband houden met het hulpmiddel, moeten gemeld worden bij de fabrikant en bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt gevestigd is.

DESINFECTEREN VAN DE LENZEN


Progrent biedt in 5 minuten een desinfecterende werking tegen micro-organismen (bacteriën, schimmels, virussen, amoeben).

VERPAKKING

Progrent is beschikbaar in een verpakking van 5 ampullen A en 5 ampullen B inclusief Progrent lenshouder en in een starterset.

SAMENSTELLING

Ampul A : NaClO 20.3 mg, gedistilleerd water à 5 ml/dosis.
Ampul B : KBr 30.75 mg, gedistilleerd water à 5 ml/dosis.

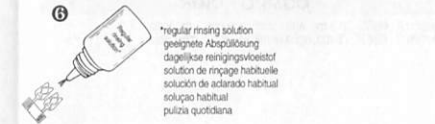

PROGENT

PROTEIN REMOVER
AND DISINFECTING SOLUTION
for all rigid gas permeable lenses.

PROTEINENTFERNER
UND DESINFEKTIONS-LÖSUNG
für alle formstabilen
sauerstoffdurchlässigen Kontaktlinsen.

PROTEÏNEVERWIJDERENDE EN
DESINFECTERENDE VLOEISTOF
voor alle vormvaste contactlenzen.

SOLUTION DE DÉPROTÉINISATION
ET DÉSINFECTION
pour toutes les lentilles rigides perméables.

SOLUCIÓN DE DESPROTEINIZACIÓN
Y DESINFECCIÓN
para todas las lentes de contacto rígidas permeables.

SOLUÇÃO DE DESPROTEINIZAÇÃO
E DESINFECÇÃO
para todas as lentes rígidas permeáveis.

SOLUZIONE PER LA RIMOZIONE
DELLE PROTEINE E LA DISINFEZIONE
per tutte le lenti a contatto rigide gas-permeabili.

STERILE A

Sterilized using aseptic processing techniques / Sterilisiert mit aseptischen Verarbeitungstechniken / Gesteriliseerd met behulp van aseptische verwerkingstechnieken / Sterilisé à l'aide de techniques de traitement aseptique / Esterilizado mediante técnicas de procesamiento aseptico / Esterilizzato utilizzando tecniche de processamento aséptico / Sterilizzato con tecniche di lavorazione aseptiche.

MD Medical device / Medizinprodukt / Medisch hulpmiddel / Dispositif médical / Dispositivo médico / Dispositivo medico.

UDI Unique Device Identifier (GS1 datamatrix)

Consult instructions for use / Gebrauchsanweisung einsehen / Raadpleeg de gebruiksaanwijzing / Consulter les instructions d'utilisation / Consulte las instrucciones de uso / Consulte as instruções de utilização / Consultare le istruzioni per l'uso.

Manufacturer/Hersteller/Fabrikant/Fabricant/Fabricante/Produttore:
Menicon Pharma SAS
Bd Sébastien Brant, Parc d'Innovation,
67400 Illkirch-Graffenstaden, France.

PROGENT

Nettoyant intensif

INDICATIONS

Solution de déproteinisation et désinfection pour toutes les lentilles rigides perméables.

MODE D'EMPLOI

- Nettoyer vos lentilles soigneusement avec votre solution de nettoyage habituelle.
- Placer les lentilles dans leurs supports respectifs fixés au couvercle de l'étui Progent : R = droite, L = gauche, pour le nettoyage intensif.
- Ouvrir les doses avec précaution en position verticale. Tourner doucement et délicatement l'extrémité en veillant à ne pas presser la dose ni à toucher l'ouverture avec les doigts.
- Placer l'extrémité de la dose à l'intérieur de l'étui Progent et verser doucement la solution A puis la solution B pour éviter toutes écoulements de solution.
- Fermer l'étui Progent et agiter doucement plusieurs fois de manière à bien mélanger les solutions A et B.
- Laisser les lentilles dans la solution pendant 30 minutes maximum.
- Retirer le couvercle de l'étui Progent et vider son contenu. Rincer abondamment les lentilles sur leurs supports avec une solution de rinçage habituelle.
- Procéder ensuite au nettoyage des lentilles avec la solution habituelle puis les rincer. Les lentilles sont alors prêtes à être posées sur les yeux ou conservées dans leur étui.
- Rincer l'étui Progent et le couvercle avec une solution de rinçage habituelle et les laisser sécher à l'air libre.

ATTENTION



Ne pas instiller le produit dans les yeux, dans le nez et la bouche. En cas de projection accidentelle, procéder immédiatement à un rinçage oculaire très abondant avec de l'eau et consulter rapidement votre ophtalmologiste.

- Le rinçage abondant des lentilles avec la solution de rinçage habituelle est une étape indispensable après trempage dans la solution Progent.
- METTRE LE PRODUIT HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Les temps de trempage des lentilles ne doit pas dépasser 30 minutes. Au-delà, cela ne porterait pas atteinte à la qualité des lentilles, mais risquerait de les décolorer.
- Important : ne pas avaler.
- A utiliser de façon hebdomadaire en port journalier (et au retrait des lentilles en port continu).
- Ne pas utiliser la solution A et B séparément.
- Doses à usage unique. Après chaque utilisation, la solution A+B et les doses doivent être jetées.
- Conservateur à température ambiante (15-25°C).
- Eviter le contact avec la peau et les projections sur les vêtements : risque de blanchiment.
- Ne pas utiliser après la date de péremption (imprimée sur les doses).
- Conservateur à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser les doses Progent A et Progent B si elles sont endommagées.
- Consulter votre médecin ou ophtalmologiste avant d'utiliser un traitement oculaire conjointement au port de lentilles de contact ou avant de changer de solution.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser pour les lentilles souples.
- Antécédents allergiques à l'un des composants.

EFFETS SECONDAIRES

En cas d'inconfort ou d'irritation persistants, retirer les lentilles de contact, arrêter d'utiliser le produit et consulter un ophtalmologiste.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

DÉSINFECTION DES LENTILLES

Progent présente une activité désinfectante vis-à-vis des microorganismes (bactéries, champignons, virus, amibes) en 5 minutes de trempage.

PRÉSENTATION

Progent est disponible en boîte de 5 doses A et B avec un étui Progent et en coffret départ.

COMPOSITION

Solution A : NaClO 20.3 mg, eau purifiée qsp 5 ml/dose.
Solution B : KBr 30.75 mg, eau purifiée qsp 5 ml/dose.

PROGENT

Limpieza intensiva

INDICACIONES

Solución de desproteinización y desinfección para todas las lentes de contacto rígidas permeables.

MODO DE USO

- Limpie las lentes de contacto con la solución habitual.
- Colocar las lentes en los soportes respectivos fijados en la tapa del estuche Progent : R = derecha, L = izquierda para limpieza intensiva.
- Abrir cuidadosamente ambas dosis, sujetándolas en posición vertical. Con cuidado y lentamente dire la punta, sin tocar la apertura o arrotar la dosis.
- Insertar la punta de la dosis dentro del estuche de Progent y llenar lentamente, primero con la solución A, y después la solución B, teniendo cuidado de no derramar ninguna solución.
- Cerrar con la tapa el estuche Progent y agitarlo delicadamente varias veces para mezclar bien las soluciones A y B.
- Dejar las lentes de contacto con solución Progent durante 30 minutos máximo.
- Retirar la tapa del estuche Progent y vaciar su contenido. Aclarar abundantemente las lentes de contacto sobre sus soportes, utilizando la solución de aclarado habitual.
- Proceder a continuación a la limpieza de las lentes de contacto con la solución habitual y después aclararlas. Así las lentes de contacto estarán listas para colocarse en los ojos o guardarse en su estuche.
- Aclarar el estuche Progent así como la tapa-soporte con la solución habitual y después aclararlas y dejarlo secar al aire.

ADVERTENCIAS



No utilizar el producto en los ojos, en la nariz y la boca. En caso de intilación accidental, aclarar abundantemente con agua y consulte con su especialista de la visión.

- El enjuague abundante de las lentes con la solución habitual es una etapa indispensable tras un remojo en la solución Progent.
- MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES DE USO

- El tiempo en remojo de las lentes de contacto no debe sobrepasar los 30 minutos. Exceder el tiempo no altera la calidad de las lentes de contacto, pero corren el riesgo de decolorarse.
- Importante : no ingerir.
- A utilizar cada semana en porte diario (al sacar las lentes si el porte es continuo).
- No utilizar la solución A o B por separado.
- Dosis de utilización única. Tirarse después de cada uso.
- Conservar a temperatura ambiente (15-25°C).
- Evitar el contacto con la piel y sobre las ropas : riesgo de decoloración.
- No utilizar después de la fecha de caducidad (impresa en las dosis).
- Mantenga la solución alejada de la luz solar directa.
- No utilizar si las dosis están dañadas.
- Si usa lentes de contacto, consulte al médico u oftalmólogo antes de utilizar una medicación para los ojos o antes de cambiar el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES

- No utilizar para lentes blandas.
- Antecedentes alérgicos a alguno de los componentes.

REACCIONES ADVERSAS

Si experimenta un malestar persistente o síntomas de irritación, quite las lentes, deje de utilizar el producto y consulte a su oftalmólogo o contactólogo.

Cualquier incidente grave que ocurra en relación con el dispositivo debe ser comunicado al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro de residencia del usuario y/o del paciente.

DESINFECCIÓN DE LAS LENTES DE CONTACTO

Progent efectúa una actividad desinfectante con respecto a los microorganismos (bacterias, hongos, virus, amebas) en 5 minutos de remojo.

PRESENTACIÓN

Progent esta disponible en cajas de 5 dosis A y B con un estuche Progent y en starter kit.

COMPOSICIÓN

Solución A : NaClO 20.3 mg, agua purificada qsp 5 ml/dosis.
Solución B : KBr 30.75 mg, agua purificada qsp 5 ml/dosis.

PROGENT

Limpeza intensiva

INDICAÇÕES

Solução de desproteinização e desinfecção para todas as lentes rígidas permeáveis.

MODO DE EMPREGO

- Limpe muito bem as suas lentes com uma solução de limpeza normal.
- Colocar as lentes nos respectivos suportes situados na tampa do estojo Progent : E = direita, L = esquerda para limpeza intensiva.
- Abra ambas as doses cuidadosamente, segurando-as verticalmente. Torça a porta cuidadosa e lentamente, sem tocar na abertura nem apertar a dose.
- Insira a ponta da dose dentro do frasco Progent e encha lentamente, primeiro com a solução A, depois com a solução B, tendo cuidado para não entornar.
- Feche o estojo Progent com a sua tampa e agite levemente várias vezes de maneira a misturar bem as soluções A e B.
- Deixe as lentes mergulhadas na solução de Progent apenas 30 máximo.
- Retirar a tampa do estojo Progent e vaziar o conteúdo. Lavar abundantemente as lentes ainda nos seus suportes com a solução habitual.
- Proceder cuidadosamente à limpeza das lentes com a solução habitual e lave-as. As lentes podem então ser colocadas nos olhos ou guardadas no seu estojo habitual.
- Lavar muito bem o estojo Progent assim como a tampa com uma solução habitual e deixe secar ao ar.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO

- Não colocar o produto diretamente nos olhos, no nariz e na boca. Em caso de acidentalmente o produto cair nos olhos, lavar imediatamente os olhos com bastante água e consultar rapidamente o oftalmologista.
- O enxaguamento abundante das lentes com a solução habitual é uma etapa indispensável após a imersão na solução Progent.
- COLOCAR O PRODUTO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

PRECAUÇÕES DE EMPREGO

- Não deixar as lentes no Progent mais de 30 minutos. Após esse tempo não irá trazer problemas quanto à qualidade das lentes mas existe o risco de as descolorir.
- Importante : não ingerir.
- A utilizar semanalmente em caso de uso diário (e ao retirar as lentes, em caso de uso contínuo).
- Não utilizar a solução A ou a solução B separadamente.
- Dose a uso único. Depois de cada utilização a solução Progent deve ser deixada fora, bem como as doses vazias.
- Conservar a temperatura ambiente (15-25°C).
- Evitar o contacto com a pele e as projeções do Progent na roupa pois existe riscos de branqueamento.
- Não usar Progent A e B após a data de expiração indicada nas ampolas.
- Mantenha afastado da luz solar directa.
- Não utilize doses Progent A e B se estiverem danificadas.
- Consulte o seu oftalmologista, antes de utilizar ou cambiar qualquer medicamento para os olhos em simultâneo com o uso das suas lentes de contacto.

CONTRA-INDICAÇÕES

- Não utilizar em lentes hidrófilas.
- Antecedentes alérgicos a um dos componentes.

REACÇÕES ADVERSAS

Se sentir desconforto ou irritação persistentes, retire as lentes, interrompa a utilização do produto e consulte o seu oftalmologista.

Todo incidente grave que ocorra em ligação com o dispositivo deverá ser objeto de uma notificação ao fabricante e a autoridade competente do Estado membro no qual o utilizador e/ou o paciente está estabelecido.

DESINFECÇÃO DAS LENTES

Progent produz um efeito desinfectante contra microorganismos (bactérias, fungos, vírus, amebas) após 5 minutos de imersão.

APRESENTAÇÃO

Progent está disponível numa caixa de 5 doses A e B com um estojo Progent e no kit de iniciação.

COMPOSIÇÃO

Solução A : NaClO 20.3 mg, água purificada qsp 5 ml/dose.
Solução B : KBr 30.75 mg, água purificada qsp 5 ml/dose.

PROGENT

Pulizia intensiva

INDICAZIONI

Soluzione per la rimozione delle proteine e la disinfezione per tutte le lenti a contatto rigide gas-permeabili.

MODALITÀ D'USO

- Pulire le lenti con la pulizia quotidiana. Per effettuare la pulizia intensiva, mettere le lenti nel supporto del copertino del portallenti Progent in dotazione : R = destra, L = sinistra per la pulizia intensiva.
- Aprire con attenzione entrambe le dosi tenendole in posizione verticale. Girare il tappo della fiala con cura, senza toccare il beccuccio e senza schiacciare il contenitore della dose.
- Inserire il beccuccio delle dosi all'interno del portallenti Progent in dotazione e versare lentamente prima la dose A, poi la dose B per evitare di disperdere la soluzione.
- Chiudere il portallenti Progent in dotazione ed agitare delicatamente e ripetutamente.
- Lasciare le lenti nella soluzione per 30 minuti al massimo.
- Aprire il copertino del portallenti Progent in dotazione e gettare la soluzione. Risciacquare abbondantemente le lenti con la soluzione che usate abitualmente per il risciacquo delle lenti.
- Procedere in seguito con la pulizia quotidiana delle lenti poi sciacquare. Le lenti a contatto sono quindi pronte per essere applicate sugli occhi o per essere riposte nel portallenti Progent in dotazione.
- Risciacquare il portallenti Progent in dotazione ed il relativo copertino con la soluzione che usate abitualmente per il risciacquo delle lenti.

AVVERTENZE



Non instillare il prodotto negli occhi, nel naso e nella bocca. Non ingerire. Se succedesse accidentalmente, procedere immediatamente ad un lavaggio oculare molto abbondante con dell'acqua e consultare l'oculista.

- Il risciacquo abbondante delle lenti con la soluzione che usate abitualmente per risciacquare, costituisce una tappa indispensabile dopo il trattamento di pulizia intensiva della soluzione Progent.
- TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

PRECAUZIONI

- Non lasciare le lenti immerse nella soluzione per più di 30 minuti. In caso contrario si potrebbero scolorire, ma senza conseguenze sulle caratteristiche delle stesse.
- Importante : non ingerire.
- Usare settimanalmente in caso di uso giornaliero delle lenti e alla rimozione in caso di porto continuo.
- Non utilizzare la dose A o la dose B separatamente.
- Dosi monouso.
- Applicare e conservare a temperatura ambiente (15-25°C).
- Evitare il contatto con la pelle ed i vestiti : rischio di decolorazione e macchie indelebili.
- Non utilizzare la soluzione dopo la data di scadenza indicata sulle singole dosi e dopo l'uso la soluzione e le dosi devono essere gettate.
- Tenere al riparo dalla luce diretta del sole.
- Non utilizzare dosi Progent A e B se sono danneggiate.
- Prima di utilizzare o cambiare qualunque farmaco oftalmico quando si applicano lenti a contatto, consultarsi con il proprio medico o con l'ottico di fiducia.

CONTRO-INDICAZIONI

- Non utilizzare per lenti morbide.
- Non utilizzare in caso di allergia ad uno dei componenti.

REAZIONI INDESIDERATE

In caso di persistente malessere o irritazione, rimuovere le lenti, non utilizzare il prodotto e consultare l'ottico di fiducia.

Qualsiasi incidente grave legato al dispositivo dovrà essere notificato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro nel quale l'utilizzatore e/o il paziente risiedono.

DISINFEZIONE DELLE LENTI

Progent svolge un'azione disinfettante contro i microorganismi (batteri, funghi, virus, amebe) già dopo 5 minuti di immersione.

CONFEZIONE

Progent è disponibile in confezioni da 5 dosi A e 5 dosi con il portallenti Progent e in formato starter kit.

COMPOSIZIONE

Soluzione A : NaClO 20.3 mg acqua purificata a 5 ml/dose.
Soluzione B : KBr 30.75 mg acqua purificata a 5 ml/dose.