

Ophtecs

ENGLISH | Instructions for Use


PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THIS INFORMATION FOR FUTURE USE

Disinfecting, cleaning and storing system for rigid gas permeable contact lenses.

FOR ALL RIGID GAS PERMEABLE CONTACT LENSES


Wash your hands well with mild soap before handling your contact lenses.

CLEANING

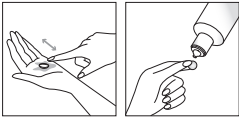

Remove each lens from your eye and place it on your palm. Place a few drops of **cleadew GP hydra one** on each lens surface and rub 20-30 times with your finger. Rinse each lens thoroughly for 5 seconds with fresh **cleadew GP hydra one**.

DISINFECTING

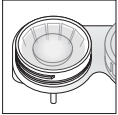

Fill the lens case with **cleadew GP hydra one** and place the lenses into the lens case. Close the lens case tightly. Soak lenses for at least 4 hours (or overnight) until ready to wear.

RINSING AND WEARING CORNEAL LENSES

Rinse corneal GP lenses for 5 seconds with **cleadew GP hydra one** before wearing

RINSING AND WEARING SPECIALTY LENSES (SCLERAL LENSES OR ORTHOKERATOLOGY LENSES)

For specialty lens users (scleral lenses or orthokeratology/Ortho K lenses), it is required to rinse your lenses thoroughly for approximately 5 seconds using sterile saline or an appropriate lens filling solution before placing them on your eye. Do not use **cleadew GP hydra one** as an insertion or rinsing solution for scleral or Ortho K lenses. Always use sterile saline or another insertion solution specifically recommended by your eye care practitioner when inserting your lenses.

WASHING LENS CASE

After the lens care, rinse the lens case with **cleadew GP hydra one** and allow to air dry.

STORAGE

Lenses may be stored in the unopened lens case for a maximum of 30 days. If the lenses are stored for longer, replace with fresh **cleadew GP hydra one** every 30 days and before wearing your lenses.

WARNINGS

- Do not use **cleadew GP hydra one** if allergic to any of the ingredients used in **cleadew GP hydra one**.
- If you experience persistent eye discomfort, excessive tearing, vision changes, or redness of the eye, remove your lenses immediately and consult your eye doctor or an eye care practitioner.
- Do not use **cleadew GP hydra one** with any eye medication or other contact lens care products.
- Do not use **cleadew GP hydra one** as an insertion or rinsing solution for **specialty lenses (scleral or orthokeratology lenses)**.

PRECAUTIONS

- Read this instruction sheet carefully before using **cleadew GP hydra one** and keep it for future reference. To avoid eye infections, always follow the user instructions.
- Take special care to follow these instructions when using **cleadew GP hydra one** with **SPECIALTY LENSES (SCLERAL OR ORTHOKERATOLOGY LENSES)**.
- Do not reuse the solution; after each use, discard any **cleadew GP hydra one** solution remaining in the lens case.
- Children should not use **cleadew GP hydra one** by themselves; parents are requested to be responsible for their daily care.
- Discard any remaining solution 3 months after opening the bottle.
- Close bottle tightly after use.
- Do not use for soft contact lenses.
- Do not swallow the solution.
- Do not touch the tip of **cleadew GP hydra one** to avoid contamination.
- Do not use **cleadew GP hydra one** for heat disinfection.
- Do not use **cleadew GP hydra one** after the expiry date.
- Do not use the solution if it is discoloured.
- Do not use **cleadew GP hydra one** if the tamper seal is damaged or missing.
- Do not use tap water to store and rinse the lenses.
- Keep out of reach of children.
- Store products at room temperature, avoiding direct sunlight.
- To prevent bacterial contamination, do not transfer the solution to another container, nor replenish it with water or other liquid medical agent.
- Do not use **cleadew GP hydra one** with an old lens case.
- Always use the new lens case provided.
- Do not change the contact lens care system without consulting eye care practitioner.
- Boric acid is toxic to reproduction and can reduce future fertility if taken by children or harm babies if taken by pregnant or lactating women. Although this product also contains boric acid, the amount of boric acid in this product is at a concentration that does not pose a health hazard. This product is safe for use by children and pregnant or lactating women as long as the product's directions are followed. Sensitivity to chemicals differs from person to person. For sensitive individuals, the recommendation is to rinse the lens with sterile saline solution before wearing.
- Ne pas utiliser l'eau du robinet pour conserver ou rincer les lentilles.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Ranger les produits à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Beachten Sie diese Anweisungen mit besonderer Sorgfalt, wenn Sie **cleadew GP hydra one** mit **Speziallinsen (Skleral- oder Orthokeratologie-Linsen)**.
- Verwenden Sie die Lösung nicht erneut; entsorgen Sie nach jedem Gebrauch die im Linsenbehälter verbliebene **cleadew GP Hydra One**-Lösung.
- Kinder sollten **cleadew GP hydra one** nicht allein verwenden; Eltern werden gebeten, die tägliche Pflege zu übernehmen.
- Schützen Sie die Reste der Lösung 3 Monate nach dem Öffnen der Flasche weg.
- Flasche nach Gebrauch fest verschließen.
- Nicht für weiche Kontaktlinsen geeignet.
- Verschlucken Sie die Lösung nicht.
- Berühren Sie bitte nicht die Spitze der Flasche von **cleadew GP hydra one**, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- cleadew GP hydra one** ist nicht für Hitzedesinfektion geeignet.
- Benutzen Sie **cleadew GP hydra one** nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.
- Verwenden Sie die Lösung nicht, wenn sie verfärbt ist.
- Benutzen Sie **cleadew GP hydra one** nicht, wenn das Sicherheitssiegel beschädigt ist oder fehlt.
- Ne pas utiliser le produit si le sceau d'inviolabilité est déchiré ou manquant.

INGREDIENTS

cleadew GP hydra one
Polyhexamethylene biguanide hydrochloride (0.0005%)

STERILE A

Hydrogen peroxide as preservative (0.004%)
Boric acid

FRANÇAIS | Mode d'emploi


À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

Système de désinfection, de nettoyage et de conservation pour lentilles de contact rigides perméables au gaz.

POUR TOUS LES TYPES DE LENTILLES DE CONTACT RIGIDES PERMÉABLES AU GAZ


Bien se laver les mains avec un savon doux avant de manipuler les lentilles.

NETTOYAGE

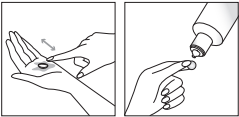

Retirez chaque lentille de l'œil et placez-la sur la paume de votre main. Déposez quelques gouttes de **cleadew GP hydra one** sur la surface de chaque lentille et frottez 20 à 30 fois avec votre doigt. Rincez soigneusement chaque lentille pendant 5 secondes avec une solution neuve **cleadew GP hydra one**.

DÉSINFECTION

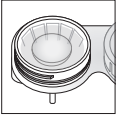

Remplissez l'étui à lentilles avec du **cleadew GP hydra one** et placez les lentilles dans l'étui. Fermez bien l'étui. Immergez les lentilles dans la solution pendant au moins 4 heures (ou pendant la nuit) jusqu'au moment de les porter.

RINÇAGE ET POSE DES LENTILLES CORNÉENNES

Rincer les lentilles cornéennes perméables au gaz (GP) pendant 5 secondes avec **cleadew GP hydra one** avant la pose.

RINÇAGE ET PORT DE LENTILLES SPÉCIALISÉES (LENTILLES SCLÉRALES OU LENTILLES D'ORTHOKÉRATOLOGIE)

Pour les utilisateurs de lentilles spécialisées (lentilles sclérales ou d'orthokératologie), il est nécessaire de rincer soigneusement vos lentilles pendant environ 5 secondes à l'aide d'une solution saline stérile ou d'une solution de remplissage appropriée avant leur pose. N'utilisez pas **cleadew GP hydra one** comme solution de pose ou de rinçage pour les lentilles sclérales ou d'orthokératologie. Utilisez toujours une solution saline stérile ou une autre solution de pose spécifiquement recommandée par votre professionnel de santé oculaire lors de la pose de vos lentilles.

NETTOYER L'ÉTUI À LENTILLES

Une fois les lentilles nettoyées, rincez leur étui avec du **cleadew GP hydra one** et laissez-le sécher à l'air.

CONSERVATION

Les lentilles peuvent être conservées dans l'étui non ouvert pendant une durée maximum de 30 jours. Si les lentilles sont conservées plus longtemps, remplacez avec une solution neuve de **cleadew GP hydra one** tous les 30 jours et avant de porter les lentilles.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser **cleadew GP hydra one** en cas d'allergie à l'un des ingrédients utilisés dans **cleadew GP hydra one**.
- En cas de sensation d'inconfort permanent au niveau des yeux, de changements dans la vision, ou de rougeurs aux yeux, retirez les lentilles immédiatement et consultez un ophtalmologue ou un spécialiste de soins oculaires.
- Ne pas utiliser **cleadew GP hydra one** avec un médicament ou autre produit de contact lens care.
- Ne pas utiliser **cleadew GP hydra one** comme solution de pose ou de rinçage pour les **lentilles spécialisées (lentilles sclérales ou d'orthokératologie)**.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Lire attentivement cette notice avant d'utiliser **cleadew GP hydra one** et s'y référer si besoin par la suite. Afin d'éviter toute infection ou lésion oculaire, il est important de suivre les consignes d'utilisation.
- Veiller à respecter scrupuleusement ces instructions lors de l'utilisation de **cleadew GP hydra one** avec des **LENTILLES SPÉCIALISÉES (LENTILLES SCLÉRALES OU D'ORTHOKÉRATOLOGIE)**.
- Ne réutilisez pas la solution ; après chaque utilisation, jetez toute solution **cleadew GP hydra one** restante dans l'étui à lentilles.
- Les enfants ne doivent pas utiliser **cleadew GP hydra one** seuls; les parents sont tenus d'être responsables des soins quotidiens.
- Jeter la solution au bout de 3 mois après l'ouverture de la bouteille.
- Bien refermer le flacon après ouverture.
- Ne pas utiliser pour les lentilles souples.
- Ne pas avaler la solution.
- Ne pas toucher l'embout de **cleadew GP hydra one** afin d'éviter la contamination.
- Ne pas utiliser **cleadew GP hydra one** pour une désinfection à la chaleur.
- Ne pas utiliser **cleadew GP hydra one** après la date de péremption.
- Ne pas utiliser une solution si elle est décolorée.
- Ne pas utiliser **cleadew GP hydra one** si le sceau d'inviolabilité est déchiré ou manquant.
- Ne pas utiliser l'eau du robinet pour conserver ou rincer les lentilles.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Ranger les produits à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Pour éviter toute contamination bactérienne, ne jamais transférer la solution dans un autre récipient, ne jamais ajouter d'eau ou un autre agent médical liquide.
- Ne pas conserver **cleadew GP hydra one** dans un vieux étui à lentilles.
- Toujours utiliser le nouvel étui fourni.
- Ne pas changer de système de nettoyage des lentilles de contact sans consulter un professionnel de santé oculaire.
- Beachten Sie diese Anweisungen mit besonderer Sorgfalt, wenn Sie **cleadew GP hydra one** mit **Speziallinsen (Skleral- oder Orthokeratologie-Linsen)**.
- Verwenden Sie die Lösung nicht erneut; entsorgen Sie nach jedem Gebrauch die im Linsenbehälter verbliebene **cleadew GP Hydra One**-Lösung.
- Kinder sollten **cleadew GP hydra one** nicht allein verwenden; Eltern werden gebeten, die tägliche Pflege zu übernehmen.
- Schützen Sie die Reste der Lösung 3 Monate nach dem Öffnen der Flasche weg.
- Flasche nach Gebrauch fest verschließen.
- Nicht für weiche Kontaktlinsen geeignet.
- Verschlucken Sie die Lösung nicht.
- Berühren Sie bitte nicht die Spitze der Flasche von **cleadew GP hydra one**, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- cleadew GP hydra one** ist nicht für Hitzedesinfektion geeignet.
- Benutzen Sie **cleadew GP hydra one** nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.
- Verwenden Sie die Lösung nicht, wenn sie verfärbt ist.
- Benutzen Sie **cleadew GP hydra one** nicht, wenn das Sicherheitssiegel beschädigt ist oder fehlt.
- Ne pas utiliser le produit si le sceau d'inviolabilité est déchiré ou manquant.

INGRÉDIENTS

cleadew GP hydra one
Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (0,0005 %)

STERILE A

Péroxyde d'hydrogène comme conservateur (0,004 %)
Acide borique

DEUTSCH | Gebrauchsanweisung


BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND DIESE INFORMATIONEN FÜR SPÄTERE NACHSCHLAGEZWECKE AUFBEWAHREN

Desinfektions-, Reinigungs- und Aufbewahrungssystem für formstabile gasdurchlässige Kontaktlinsen.

FÜR ALLE FORMSTABILEN GASDURCHLÄSSIGEN KONTAKTLINSEN


Vor dem Kontakt mit den Kontaktlinsen reinigen Sie Ihre Hände gründlich mit einer milden Handwaschseife.

REINIGUNG

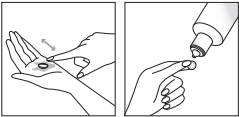

Nehmen Sie die Kontaktlinsen aus Ihren Augen und legen Sie sie auf Ihre Handfläche. Geben Sie ein paar Tropfen **cleadew GP hydra one** auf die Oberfläche der Kontaktlinsen und reiben Sie 20–30-mal mit Ihrem Finger. Spülen Sie die Kontaktlinsen sorgfältig 5 Sekunden lang mit frischem **cleadew GP hydra one** ab.

DESINFEKTION

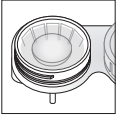

Füllen Sie den Kontaktlinsenbehälter mit frischem **cleadew GP hydra one** und legen Sie die Kontaktlinsen in den Kontaktlinsenbehälter. Verschließen Sie den Kontaktlinsenbehälter fest. Weichen Sie die Kontaktlinsen mindestens 4 Stunden lang (oder über Nacht) ein, bis sie getragen werden können.

SPÜLEN UND TRAGEN VON HORNHAUTLINSEN

Spülen Sie die Hornhaut-GP-Linsen vor jedem Tragen 5 Sekunden lang mit **cleadew GP hydra one**.

ABSPÜLEN UND TRAGEN VON SPEZIALLINSEN (SKLERALLINSEN ODER ORTHOKERATOLOGIE-LINSEN)

Benutzer von Speziallinsen (Sklerallinsen oder Orthokeratologie-/Ortho-K-Linsen) müssen die Linsen vor dem Aufsetzen auf das Auge ca. 5 Sekunden lang gründlich mit steriler Kochsalzlösung oder einer geeigneten Linseneinfülllösung abspülen. Verwenden Sie **cleadew GP hydra one** nicht als Einsetz- oder Abspülllösung für Skleral- oder Ortho-K-Linsen. Verwenden Sie beim Einsetzen Ihrer Linsen immer sterile Kochsalzlösung oder eine andere Einsetzlösung, die speziell von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlen wurde.

REINIGEN DES KONTAKTLINSENBEHÄLTERS

Spülen Sie nach der Kontaktlinsenpflege den Kontaktlinsenbehälter mit **cleadew GP hydra one** aus und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

AUFBEWAHRUNG

Die Kontaktlinsen können im ungeöffneten Kontaktlinsenbehälter maximal 30 Tage lang aufbewahrt werden. Wenn Sie die Kontaktlinsen länger aufbewahren möchten, tauschen Sie das **cleadew GP hydra one** alle 30 Tage und vor dem Tragen Ihrer Kontaktlinsen aus.

WARNUNGEN

- Benutzen Sie **cleadew GP hydra one** nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.
- Sollten Augenbeschwerden, tränende Augen, Veränderungen der Sicht oder eine Rötung der Augen auftreten, nehmen Sie sofort Ihre Kontaktlinsen heraus und gehen Sie zu Ihrem Augenarzt.
- Benutzen Sie bitte **cleadew GP hydra one** nicht zusammen mit Augenmedikamenten oder anderen Kontaktlinsen-Pflegeprodukten.
- Verwenden Sie **cleadew GP hydra one** nicht als Einsetz- oder Spüllösung für **Speziallinsen (Skleral- oder Orthokeratologie-Linsen)**.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig, bevor Sie **cleadew GP hydra one** benutzen und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Um Augeninfektionen zu verhindern, befolgen Sie bitte immer die Gebrauchsanweisungen.
- Beachten Sie diese Anweisungen mit besonderer Sorgfalt, wenn Sie **cleadew GP hydra one** mit **Speziallinsen (Skleral- oder Orthokeratologie-Linsen)**.
- Verwenden Sie die Lösung nicht erneut; entsorgen Sie nach jedem Gebrauch die im Linsenbehälter verbliebene **cleadew GP Hydra One**-Lösung.
- Kinder sollten **cleadew GP hydra one** nicht allein verwenden; Eltern werden gebeten, die tägliche Pflege zu übernehmen.
- Schützen Sie die Reste der Lösung 3 Monate nach dem Öffnen der Flasche weg.
- Flasche nach Gebrauch fest verschließen.
- Nicht für weiche Kontaktlinsen geeignet.
- Verschlucken Sie die Lösung nicht.
- Berühren Sie bitte nicht die Spitze der Flasche von **cleadew GP hydra one**, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- cleadew GP hydra one** ist nicht für Hitzedesinfektion geeignet.
- Benutzen Sie **cleadew GP hydra one** nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.
- Verwenden Sie die Lösung nicht, wenn sie verfärbt ist.
- Benutzen Sie **cleadew GP hydra one** nicht, wenn das Sicherheitssiegel beschädigt ist oder fehlt.
- Kontaktlinsen nicht mit Leitungswasser spülen oder darin aufbewahren.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lagern Sie die Produkte bei Raumtemperatur, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Um eine bakterielle Verunreinigung zu vermeiden, dürfen Sie die Lösung nicht in einen anderen Behälter umfüllen oder mit Wasser oder anderen flüssigen medizinischen Mitteln auffüllen.
- Bewahren Sie **cleadew GP hydra one** nicht in alten Kontaktlinsenbehältern auf.
- Benutzen Sie bitte immer den neuen mitgelieferten Kontaktlinsenbehälter.
- Wechseln Sie Ihr Kontaktlinsenpflegesystem nur nach fachkundiger Spezialist.
- Borsäure ist fortpflanzungsgefährdend und kann bei Einnahme durch Kinder die zukünftige Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder bei Einnahme durch schwangere oder stillende Frauen das Kind schädigen. Obwohl dieses Produkt auch Borsäure enthält, liegt die Menge an Borsäure in diesem Produkt in einer Konzentration vor, die keine Gesundheitsgefährdung darstellt. Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Kinder sowie schwangere bzw. stillende Frauen sicher, sofern die Anweisungen des Produkts befolgt werden. Die Empfindlichkeit gegenüber Chemikalien ist von Person zu Person unterschiedlich. Für empfindliche Personen empfiehlt es sich, die Linse vor dem Tragen mit steriler Kochsalzlösung abzuspülen.

INHALTSSTOFFE

cleadew GP hydra one
Polyhexamethylenbiguanid-Hydrochlorid (0,0005 %)

STERILE A

Wasserstoffperoxid als Konservierungsstoff (0,004 %)
Borsäure

ESPAÑOL | Instrucciones de uso


LEA DETENIDAMENTE Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS

Sistema de desinfección, limpieza y almacenamiento para lentes de contacto rígidas permeables al gas.

PARA TODAS LAS LENTES DE CONTACTO RÍGIDAS PERMEABLES AL GAS


Lávese bien las manos con jabón neutro antes de manipular sus lentes de contacto.

LIMPIEZA

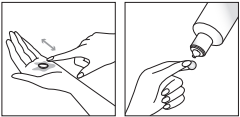

Retire cada lente de contacto de su ojo y colóquela en la palma de su mano. Coloque unas pocas gotas de **cleadew GP hydra one** en la superficie de cada lente de contacto y frótela de 20 a 30 veces con su dedo. Aclare cada lente de contacto a fondo durante 5 segundos con **cleadew GP hydra one**.

DESINFECCIÓN

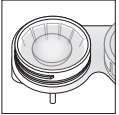

Llene el estuche de las lentes de contacto con **cleadew GP hydra one** y coloque las lentes de contacto en el estuche. Cierre el estuche con firmeza. Deje las lentes de contacto en remojo durante al menos 4 horas (o durante la noche) hasta que estén listas para usarse.

ENJUAGUE Y COLOCACIÓN DE LENTES CORNEALES

Antes de colocarlas, enjuague las lentes corneales GP durante 5 segundos con **cleadew GP hydra one**.

ENJUAGUE Y USO DE LENTES ESPECIALES (LENTES ESCLERALES U ORTOQUERATOLÓGICAS)

Para usuarios de lentes especiales (lentes esclerales o lentes de ortoqueratología (Ortho-K)), es necesario enjuagar bien las lentes durante unos 5 segundos con solución salina estéril o una solución de llenado de lentes adecuada antes de colocarlas en el ojo. No utilice **cleadew GP hydra one** como solución de inserción ni de enjuague para lentes esclerales u ortoqueratológicas. Utilice siempre solución salina estéril u otra solución de inserción recomendada específicamente por su profesional de la salud visual al insertar las lentes.

COMO LAVAR EL ESTUCHE PARA LENTES

Después del cuidado de la lente, limpie el estuche de las lentes con **cleadew GP hydra one** y deje que se seque al aire.

CONSERVACIÓN

Las lentes de contacto se pueden almacenar en el estuche no abierto durante un máximo de 30 días. Si las lentes de contacto se almacenan durante más tiempo, rellénelo con **cleadew GP hydra one** nuevo cada 30 días y antes de usar sus lentes de contacto.

ADVERTENCIAS

- No utilice **cleadew GP hydra one** si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.
- Si experimenta cualquier molestia ocular persistente, lagrimeo excesivo, cambios en la visión o enrojecimiento de los ojos, quítese las lentes inmediatamente y consulte con su oftalmólogo o un especialista en el cuidado de los ojos.
- No utilice **cleadew GP hydra one** con ningún medicamento para los ojos u otros productos para el cuidado de las lentes de contacto.
- No utilice **cleadew GP hydra one** como solución de inserción ni de enjuague para **lentes especiales (lentes esclerales u ortoqueratológicas)**.

PRECAUCIONES

- Lea atentamente este folleto de instrucciones antes de utilizar **cleadew GP hydra one** y guárdelo para futuras consultas. Para evitar infecciones en los ojos, siga siempre las instrucciones del usuario.
- Al utilizar **cleadew GP hydra one** con **LENTES ESPECIALES (LENTES ESCLERALES U ORTOQUERATOLÓGICAS)**, siga estas instrucciones con especial atención.
- No reutilice la solución; después de cada uso, deseché cualquier cantidad restante de solución **cleadew GP hydra one** del estuche de las lentes.
- Los niños no deben utilizar **cleadew GP hydra one** por sí mismos; solicítamos amablemente a los padres que se encarguen del cuidado diario de las lentes de sus hijos.
- Deseché la cantidad de solución que quede 3 meses después de abrir el bote.
- Cierre el bote firmemente después de cada uso.
- No utilice el producto con lentes de contacto blandas.
- No ingiera la solución.
- No toque la punta de **cleadew GP hydra one** para evitar la contaminación.
- No utilice **cleadew GP hydra one** para la desinfección mediante el calor.
- No utilice **cleadew GP hydra one** después de su fecha de caducidad.
- No utilice la solución si está descolorida.
- No utilice **cleadew GP hydra one** si el sello de garantía está dañado o falta.
- No utilice agua del grifo para guardar y enjuagar sus lentes.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Guarde los productos a temperatura ambiente, evitando la luz directa del sol.
- Para evitar la contaminación bacteriana, no transfiera la solución a otro recipiente, ni la rellene con agua u otro agente médico líquido.
- No utilice **cleadew GP hydra one** en un estuche antiguo para lentes.
- Utilice siempre el estuche nuevo que acompaña el producto.
- No cambie el sistema para el cuidado de sus lentes de contacto sin antes consultar con un profesional de la salud visual.
- El ácido bórico es tóxico para la reproducción y puede reducir la fertilidad futura si lo toman los niños o dañar a los bebés si lo toman las mujeres embarazadas o lactantes. Aunque este producto también contiene ácido bórico, la cantidad de ácido bórico en el mismo está en una concentración que no supone un peligro para la salud. Este producto puede ser utilizado sin peligro por niños y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia siempre que se sigan las instrucciones del producto. La sensibilidad a los productos químicos varía de una persona a otra. Para las personas sensibles, la recomendación es enjuagar las lentes con solución salina estéril antes de usarlas.

INGREDIENTES

cleadew GP hydra one
Hidrocloruro de polihexametileno biguanida (0.0005 %)

STERILE A

Peroxido de hidrogeno como conservantes (0,004 %)
Acido borico

ITALIANO | Istruzioni per l'uso


LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE INFORMAZIONI E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO

Sistema di disinfezione, pulizia e conservazione per lenti a contatto rigide gas permeabili.

PER TUTTE LE LENTI A CONTATTO RIGIDE GAS PERMEABILI.


Lavare bene le mani con sapone neutro prima di toccare le lenti.

PULIZIA

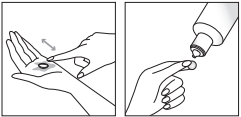

Rimuovere ciascuna lente dall'occhio e posizionarla sul palmo della mano. Mettere alcune gocce di soluzione **cleadew GP hydra one** sulla superficie di ciascuna lente e strofinare 20–30 volte con il dito. Risciacquare accuratamente ciascuna lente per 5 secondi con soluzione fresca **cleadew GP hydra one**.

DISINFEZIONE

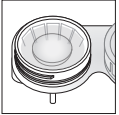

Riempire il portalenti con soluzione **cleadew GP hydra one** e posizionare le lenti nel portalenti. Chiudere con accuratezza il portanti. Immergere le lenti per almeno 4 ore (o per una notte) fino a quando si è pronti per indossarle.

RISCIACQUO E INSERIMENTO DI LENTI CORNEALI

Risciacquare le lenti corneali GP per 5 secondi con **cleadew GP hydra one** prima di indossarle.

RISCIACQUO E APPLICAZIONE DI LENTI SPECIALI (LENTI SCLERALI O LENTI ORTOCHERATOLOGICHE)

Per chi utilizza lenti speciali (lenti sclerali o lenti ortocheratologiche/Ortho K): prima di applicare le lenti, è necessario sciacquarle accuratamente per circa 5 secondi con soluzione salina sterile o apposita soluzione di riempimento. Non utilizzare **cleadew GP hydra one** come soluzione di inserimento o di risciacquo per lenti sclerali o ortocheratologiche. Per l'inserimento delle lenti, utilizzare sempre soluzione salina sterile o altra soluzione di inserimento specifica consigliata dal proprio oculista.

LAVARE IL PORTALENTI

Dopo il trattamento della lente, risciacquare il portalenti con soluzione **cleadew GP hydra one** e lasciare asciugare all'aria.

CONSERVAZIONE

Le lenti possono essere conservate nel portalenti chiuso per un massimo di 30 giorni. Se le lenti vengono conservate più a lungo, sostituire la soluzione con **cleadew GP hydra one** fresca ogni 30 giorni e prima di indossare le lenti.

AVVERTENZE

- Non utilizzare in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti utilizzati in **cleadew GP hydra one**.
- In caso di persistente fastidio oculare, lacrimazione eccessiva, alterazioni della visione o arrossamento oculare, rimuovere immediatamente le lenti e consultare il proprio oculista o uno specialista.
- Non utilizzare **cleadew GP hydra one** con farmaci oculari o altri prodotti per la cura delle lenti a contatto.
- Non utilizzare **cleadew GP hydra one** come soluzione per l'inserimento o il risciacquo delle lenti speciali (lenti sclerali o lenti ortocheratologiche).

PRECAUZIONI

- Leggere attentamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare **cleadew GP hydra one** e conservarlo per riferimento futuro. Per evitare infezioni oculari, seguire sempre le istruzioni per l'uso.
- Seguire attentamente queste istruzioni quando si utilizza **cleadew GP hydra one** con **LENTI SPECIALI (LENTI SCLERALI O LENTI ORTOCHERATOLOGICHE)**.
- Non riutilizzare la soluzione; dopo ogni utilizzo, gettare via la soluzione **cleadew GP hydra one** presente nel contenitore delle lenti.
- I bambini non devono usare **cleadew GP hydra one** da soli; i genitori sono responsabili della loro cura quotidiana.
- Eliminare l'eventuale soluzione rimanente 3 mesi dopo l'apertura del flacone.
- Chiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Non utilizzare il prodotto con lenti a contatto morbide.
- Non ingerire la soluzione.
- Non toccare la punta di **cleadew GP hydra one** per evitare la contaminazione.
- Non utilizzare **cleadew GP hydra one** per disinfettare a caldo.
- Non utilizzare **cleadew GP hydra one** dopo la data di scadenza.
- Non utilizzare la soluzione se è scolorita.
- Non utilizzare **cleadew GP hydra one** se il sigillo antimanomissione è danneggiato o assente.
- Non utilizzare acqua del rubinetto per conservare e risciacquare le lenti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare i prodotti a temperatura ambiente, evitando la luce solare diretta.
- Per evitare la contaminazione batterica, non trasferire tale soluzione in un altro contenitore, né rabboccare lo stesso con acqua o altri agenti medici liquidi.
- Non utilizzare **cleadew GP hydra one** con portالenti usati.
- Utilizzare sempre il portالenti in dotazione.
- Non cambiare il sistema di cura delle lenti a contatto senza aver prima consultato uno oculista.
- L