

Ophtecs

● NEDERLANDS | Aanwijzingen voor gebruik


LEES DEZE INFORMATIE ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Systeem voor het desinfecteren, reinigen en bewaren van harde contactlenzen die gas doorlaten.

VOOR ALLE HARDE CONTACTLENZEN DIE GAS DOORLATEN


Was uw handen zeer goed met een milde zeep alvorens uw lenzen aan te raken.

1 REINIGEN

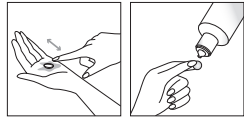

- Verwijder de contactlenzen uit uw ogen en plaats ze in uw handpalm. Doe een paar druppels **cleadew GP hydra one** op elk lensoppervlak en wrijf 20–30 keer met uw vinger. Spoel elke contactlens 5 seconden grondig met verse **cleadew GP hydra one**.

2 DESINFECTEREN

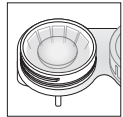

- Vul de lenshouder met **cleadew GP hydra one** en plaats de lenzen in de lenshouder. Sluit de lenshouder goed af. Laat de contactlenzen tenminste 4 uur (of gedurende de nacht) weken tot ze klaar zijn om te dragen.

3a SPOELEN EN DRAGEN VAN CORNEALE LENZEN

- Spoel corneale GP-lenzen gedurende 5 seconden met **cleadew GP hydra one** vóór het inzetten.

3b SPOELEN EN DRAGEN VAN SPECIALE LENZEN (SCLERALE LENZEN OF ORTHOKERATOLOGIELENZEN)

- Voor dragers van speciale lenzen (sclerale lenzen of orthokeratologie-/Ortho-K-lenzen) is het noodzakelijk de lenzen vóór het inzetten gedurende ongeveer 5 seconden grondig te spoelen met steriele zoutoplossing of een geschikte vuloplossing.
- Gebruik **cleadew GP hydra one** niet als vul- of spoeloplossing voor sclerale of Ortho-K-lenzen. Gebruik bij het inzetten van uw lenzen altijd steriele zoutoplossing of een andere vuloplossing die wordt aanbevolen door uw oogzorgspecialist.

4 REINIGEN VAN HET LENZENBAKJE

- Spoel, na het verzorgen van de contactlens, de lenshouder met **cleadew GP hydra one** en laat aan de lucht drogen.

BEWAREN

- Contactlenzen kunnen maximaal 30 dagen worden bewaard in de gesloten lenshouder. Als de contactlenzen langer worden bewaard, ververs dan de **cleadew GP hydra one** om de 30 dagen en voordat u uw contactlenzen draagt.

⚠ WAARSCHUWINGEN

- Gebruik **cleadew GP hydra one** niet indien u allergisch bent voor een van de in **cleadew GP hydra one** gebruikte bestanddelen.
- Haal de lenzen direct uit uw ogen en raadpleeg een oogarts of contactlensspecialist in geval van aanhoudende last van uw ogen, overmatige tranen, verandering in zicht of rode ogen.
- Gebruik **cleadew GP hydra one** niet in combinatie met oogmedicatie of andere verzorgingsproducten voor contactlenzen.
- Gebruik **cleadew GP hydra one** niet als inzet- of spoeloplossing voor **speciale lenzen (sclerale lenzen of orthokeratologielenzen)**.

⚠ VOORZORGSMATREGELEN

- Lees deze aanwijzingen goed door alvorens **cleadew GP hydra one** te gebruiken en bewaar referentie. Voorkom ooginfectie en volg derhalve altijd de aanwijzingen voor gebruik op.
- Volg deze instructies nauwkeurig op bij het gebruik van **cleadew GP hydra one** in combinatie met **SPECIALE LENZEN (SCLERALE LENZEN OF ORTHOKERATOLOGIELENZEN)**.
- Gebruik de oplossing niet opnieuw; gooi na elk gebruik eventuele resten van de **cleadew GP hydra one**-oplossing in de lenshouder weg.
- Kinderen mogen **cleadew GP hydra one** niet zelf gebruiken; een volwassene moet verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse verzorging.
- Gooi resterende vloeistof 3 maanden na het openen van de fles weg.
- Sluit de fles na gebruik goed.
- Gebruik het product niet voor zachte contactlenzen.
- De vloeistof niet inslikken.
- Voorkom vervuiling en besmetting en raak de punt van **cleadew GP hydra one** niet aan.
- **cleadew GP hydra one** niet gebruiken voor hitte-desinfectie.
- Gebruik **cleadew GP hydra one** niet nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken.
- De vloeistof niet gebruiken als deze verkleurd is.
- **cleadew GP hydra one** niet gebruiken indien het zegel is beschadigd of ontbreekt.
- Gebruik geen kraanwater voor het bewaren en spoelen van lenzen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Bewaar producten op kamertemperatuur, vermijd daarbij blootstelling aan direct zonlicht.
- Om risico op bacteriële verontreiniging te voorkomen, de vloeistof niet overbrengen naar een andere houder, niet aanvullen met water of een andere medische vloeistof.
- **cleadew GP hydra one** niet gebruiken met een oud lenzenbakje.
- Gebruik altijd het nieuwe, bijgeleverde lenzenbakje.
- Raadpleeg een oogarts of contactlensoogzorgspecialist alvorens van verzorgingssysteem voor contactlenzen te wisselen.
- Boorzuur is schadelijk voor de voortplanting en kan bij inname door kinderen de toekomstige vruchtbaarheid verminderen of bij inname door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Ondanks dat dit product boorzuur bevat, is de concentratie dermate laag dat het geen gezondheidsrisico vormt. Daarom kan dit product veilig gebruikt worden door kinderen en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven zolang de instructies voor juist gebruik van het product worden opgevolgd. Gevoeligheid voor chemicaliën verschilt per persoon. Indien u gevoelig bent, raden we aan de lenzen te spoelen in een steriele saline-oplossing alvorens de lenzen te dragen.

BESTANDDELEN

cleadew GP hydra one
Polyhexamethyleenbiguanide hydrochloride (0,0005%)



Waterstofperoxide ter conservering (0,004%)
Boorzuur

● PORTUGUÊS | Instruções de utilização


LEIA ATENTAMENTE E GUARDE ESTA INFORMAÇÃO PARA CONSULTA FUTURA

Sistema de desinfecção, limpeza e armazenamento para lentes de contacto rígidas permeáveis ao gás (RPG).

PARA TODAS AS LENTES DE CONTACTO RÍGIDAS PERMEÁVEIS AO GÁS


Lave cuidadosamente as mãos com sabão neutro antes de manusear as suas lentes de contacto.

1 LIMPEZA

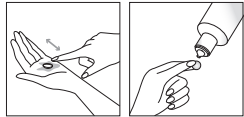

- Retire cada lente do olho e coloque-a na palma da mão. Deite algumas gotas de **cleadew GP hydra one** em cada superfície da lente e esfregue 20–30 vezes com o seu dedo. Enxague bem cada lente durante 5 segundos com o novo **cleadew GP hydra one**.

2 DESINFECÇÃO

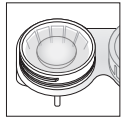

- Encha o estojo das lentes com **cleadew GP hydra one** e coloque as lentes em cada compartimento. Feche bem o estojo. Mergulhe as lentes durante pelo menos 4 horas (ou durante a noite) até estarem prontas a usar.

3a ENXAGUAR E UTILIZAR LENTES CORNEAIS

- Enxague as lentes GP corneais durante 5 segundos com **cleadew GP hydra one** antes de as utilizar.

3b ENXAGUAMENTO E UTILIZAÇÃO DE LENTES ESPECIAIS (LENTES ESCLERAIS OU LENTES DE ORTOQUERATOLOGIA)

- Para utilizadores de lentes especiais (lentes esclerais ou lentes de ortoqueratologia/Ortho-K), é necessário enxaguar bem as lentes durante aproximadamente 5 segundos, utilizando solução salina estéril ou uma solução de enchimento de lentes adequada antes de as colocar no olho.
- Não utilize **cleadew GP hydra one** como solução de inserção ou enxaguamento para lentes esclerais ou Ortho-K. Utilize sempre solução salina estéril ou outra solução de inserção especificamente recomendada pelo seu especialista em visão ao inserir as suas lentes.

4 LAVAR O ESTOJO

- Após os cuidados com as lentes, enxague o estojo com **cleadew GP hydra one** e deixe secar ao ar.

ARMAZENAMENTO

- As lentes podem ser armazenadas no estojo fechado por um máximo de 30 dias. Se as lentes forem guardadas por mais tempo, substitua por uma solução fresca de **cleadew GP hydra one** a cada 30 dias e antes de usar as suas lentes.

⚠ ADVERTÊNCIAS

- Não use **cleadew GP hydra one** se for alérgico a qualquer um dos ingredientes utilizados no mesmo.
- Caso sinta desconforto persistente nos olhos, lacrimejar excessivo, alterações de visão ou olhos vermelhos, retire imediatamente as lentes e consulte o seu médico oftalmologista, optometrista ou profissional da visão.
- Não use **cleadew GP hydra one** juntamente com qualquer medicação para os olhos ou outros produtos de cuidado das lentes de contacto.
- Não use **cleadew GP hydra one** como uma solução de inserção ou de enxaguamento para **lentes especiais (lentes esclerais ou de ortoqueratologia)**.

⚠ PRECAUÇÕES

- Leia atentamente esta folha de instruções antes de usar o **cleadew GP hydra one** e guarde-a para referência futura. Para evitar infeções oculares, siga sempre as instruções de utilização.
- Tenha um cuidado especial a seguir estas instruções quando utilizar **cleadew GP hydra one** com **LENTES ESPECIAIS (LENTES ESCLERAIS OU DE ORTOQUERATOLOGIAS)**.
- Não reutilize a solução; após cada utilização, elimine qualquer solução **cleadew GP hydra one** que permaneça no estojo das lentes.
- As crianças não devem usar **cleadew GP hydra one** sozinhas; os pais são responsáveis pelos seus cuidados diários.
- Deite fora qualquer solução restante 3 meses após a abertura do frasco.
- Feche bem o frasco após a utilização.
- Não utilize com lentes de contacto hidrofílicas.
- Não engula a solução.
- Não toque na ponta do frasco para evitar a contaminação.
- Não utilize o **cleadew GP hydra one** para desinfecção com recurso ao calor.
- Não utilize o **cleadew GP hydra one** após a data de validade.
- Não utilize a solução se estiver descolorida.
- Não utilize o **cleadew GP hydra one** se o selo estiver danificado ou ausente.
- Não utilize água da torneira para armazenar e enxaguar as lentes.
- Mantenha a solução fora do alcance das crianças.
- Armazene os produtos à temperatura ambiente, evitando a luz solar direta.
- Para prevenir a contaminação bacteriana, não transfira a solução para outro recipiente, nem reabasteça com água ou com outro agente médico líquido.
- Não utilize o **cleadew GP hydra one** com um estojo de lentes antigo.
- Utilize sempre o novo estojo de lentes fornecido.
- Não mude o sistema de tratamento de lentes de contacto sem consultar um especialista em visão de cuidados oculares.
- O ácido bórico é tóxico para a reprodução e pode reduzir a fertilidade no futuro se ingerido por crianças ou prejudicar os bebés se ingerido por mulheres grávidas ou lactantes. Apesar de este produto também conter ácido bórico, a sua concentração não constitui um perigo para a saúde. O produto pode ser utilizado com segurança por crianças e mulheres grávidas ou à amamentar, desde que sejam seguidas as instruções de utilização. A sensibilidade aos produtos químicos varia de pessoa para pessoa. No caso de indivíduos sensíveis, recomenda-se a lavagem da lente com uma solução salina estéril antes da utilização.

INGREDIENTES

cleadew GP hydra one
Cloridrato de poli-hexametileno biguanida (0,0005%)



Peróxido de hidrogénio como conservante (0,004%)
Ácido bórico

● ΕΛΛΗΝΙΚΑ | Οδηγίες Χρήσης


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Σύστημα απολύμανσης, καθαρισμού και αποθήκευσης για άκαμπτους αεροδιαπερατούς φακούς επαφής.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΚΑΜΠΤΟΥΣ ΑΕΡΙΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ


Πλύνετε καλά τα χέρια σας με ήπιο σαπούνι πριν αγγίξετε τους φακούς επαφής σας.

1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

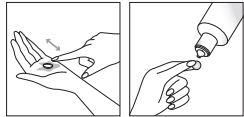

- Αφαιρέστε κάθε φακό από το μάτι σας και τοποθετήστε τον στην παλάμη σας. Ρίξτε μερικές σταγόνες **cleadew GP hydra one** στην επιφάνεια κάθε φακού και τρίψτε 20–30 φορές με το δάχτυλό σας. Ξεπλύνετε καλά κάθε φακό με το δευτερόλεπτα με καθαρό **cleadew GP hydra one**.

2 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

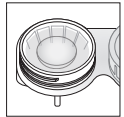

- Γεμίστε τη θήκη φακών με **cleadew GP hydra one** και τοποθετήστε τους φακούς στη θήκη φακών. Κλείστε καλά τη θήκη. Εμβάπτιστε τους φακούς για τουλάχιστον 4 ώρες (ή όλη τη νύχτα) μέχρι να τους ξαναφορέσετε.

3a ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

- Ξεπλύνετε τους κερατοειδικούς φακούς GP για 5 δευτερόλεπτα με **cleadew GP hydra one** πριν από την τοποθέτηση.

3b ΕΚΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ (ΕΚΛΗΡΟΕΙΔΕΙΣ ΦΑΚΟΙ Η ΦΑΚΟΙ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ)

- Για χρήστες ειδικών φακών (σκληροειδείς φακοί ή φακοί ορθοκερατολογίας/Ortho K), απαιτείται να ξεπλύνετε τους φακούς σας σχολαστικά για περίπου 5 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας στείρο φυσιολογικό ορό ή κατάλληλο διάλυμα πλήρωσης φακών πριν τους τοποθετήσετε στο μάτι σας.
- Μην χρησιμοποιείτε το **cleadew GP hydra one** ως διάλυμα τοποθέτησης ή έκπλυσης για σκληροειδείς φακούς ή φακούς Ortho K. Χρησιμοποιείτε πάντα στείρο φυσιολογικό ορό ή άλλο διάλυμα τοποθέτησης που συστήνεται ειδικά από τον ειδικό φροντίδας των ματιών σας κατά την τοποθέτηση των φακών σας.

4 ΘΗΚΗ ΠΛΥΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

- Μετά τη φροντίδα των φακών, ξεπλύνετε τη θήκη φακών με **cleadew GP hydra one** και αφήστε τη να στεγνώσει στον αέρα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Οι φακοί μπορούν να αποθηκευτούν στην κλειστή θήκη φακών για μέγιστο διάστημα 30 ημερών. Εάν οι φακοί αποθηκευτούν για περισσότερο χρονικό διάστημα, αντικαταστήστε με καινούριο **cleadew GP hydra one** κάθε 30 ημέρες και πριν φορέσετε τους φακούς σας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μην χρησιμοποιείτε το **cleadew GP hydra one** εάν είστε αλλεργικοί σε οποιοδήποτε από τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στο **cleadew GP hydra one**.
- Εάν αισθανθείτε επίμονη ενόχληση στα μάτια, υπερβολική δακρύρροια, αλλαγές στην όραση ή ερυθρότητα στους οφθαλμούς, αφαιρέστε αμέσως τους φακούς σας και συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρό σας ή έναν επαγγελματία οπτικό.
- Μην χρησιμοποιείτε το **cleadew GP hydra one** μαζί με οποιοδήποτε οφθαλμικό φάρμακο ή άλλα προϊόντα φροντίδας φακών επαφής.
- Μην χρησιμοποιείτε το **cleadew GP hydra one** ως διάλυμα τοποθέτησης ή ξεβγάλματος για **ειδικούς φακούς (σκληροειδείς φακοί ή φακοί ορθοκερατολογίας)**.

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φύλλο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε το **cleadew GP hydra one** και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Για την αποφυγή οφθαλμικών λοιμώξεων, να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης.
- Ακόμτε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση αυτών των οδηγιών όταν χρησιμοποιείτε το **cleadew GP hydra one** με **ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ (ΣΚΛΗΡΟΕΙΔΕΙΣ ΦΑΚΟΙ Η ΦΑΚΟΙ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ)**.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε το διάλυμα. Μετά από κάθε χρήση, απορρίψτε τυχόν διάλυμα **cleadew GP hydra one** που απομένει στη θήκη των φακών.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τους το **cleadew GP hydra one**: οι γονείς παρακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή τους φροντίδα.
- Απορρίψτε τυχόν εναπομείναν διάλυμα 3 μήνες μετά το άνοιγμα της φιάλης.
- Κλείστε καλά τη φιάλη μετά τη χρήση.
- Να μη χρησιμοποιείται για μαλακούς φακούς επαφής.
- Μην καταπίνετε το διάλυμα.
- Μην αγγίξετε το ρύγχος του **cleadew GP hydra one** για να αποφύγετε τη μόλυνση.
- Μην χρησιμοποιείτε το **cleadew GP hydra one** για θερμική απολύμανση.
- Μην χρησιμοποιείτε το **cleadew GP hydra one** μετά την ημερομηνία λήξης.
- Μην χρησιμοποιείτε το διάλυμα εάν είναι αποχρωματισμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε το **cleadew GP hydra one** εάν η σφραγίδα ασφαλείας έχει υποστεί φθορά ή λείπει.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό της βρύσης για την αποθήκευση και την πλύση των φακών.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Αποθηκεύστε τα προϊόντα σε θερμοκρασία δωματίου, αποφεύγοντας το άμεσο ηλιακό φως.
- Για την αποφυγή βακτηριακής μόλυνσης, μην μεταφέρετε το διάλυμα σε άλλο δοχείο και μην το αναπληρώνετε με νερό ή άλλο υγρό μεσο για ιατρική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε το **cleadew GP hydra one** με πολύ θήκη φακών.
- Χρησιμοποιείτε πάντα την καινούρια θήκη φακών που παρέχεται.
- Μην αλλάζετε το σύστημα φροντίδας φακών επαφής χωρίς να συμβουλευτείτε ειδικός επαγγελματία.
- Το βορικό οξύ είναι τοξικό για την αναπαραγωγική και μπορεί να μειώσει τη μελλοντική γονιμότητα εάν καταποθεί από παιδιά ή να βλάψει τα μωρά εάν ληφθεί από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Παρότι το παρόν προϊόν περιέχει βορικό οξύ, η ποσότητα βορικού οξέος στο προϊόν είναι σε τέτοια συγκέντρωση που δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία. Το παρόν προϊόν είναι ασφαλείς για χρήση από παιδιά και έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες εάν τηρηθούν οι οδηγίες του προϊόντος. Η ευαισθησία στα χημικά διαφέρει από άτομο σε άτομο. Για άτομα με ευαισθησία, η σύσταση είναι να ξεπλύνετε τον φακό με διάλυμα στείρου φυσιολογικού ορού πριν τον φορέσετε.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

cleadew GP hydra one
Υδροχλωρική Πολύ (εξαμεθυλενο) διουανιδή (0,0005%)



Υπεροξείδιο του Υδρογόνου ως συντηρητικό (0,004%)
Βορικό οξύ

● TÜRKÇE | Kullanım Talimatları


LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN VE BU BİLGİLERİ GELECEKTE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN

Sert gaz geçirgen kontakt lensler için dezenfeksiyon, temizlik ve saklama sistemidir.

TÜM SERT GAZ GEÇİRGEN KONTAKT LENSLER İÇİNDİR


Kontakt lenslerinizi tutmadan önce ellerinizi yumuşak sabunla iyice yıkayınız.

1 TEMİZLEME

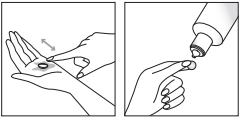

- Her bir lensi gözünüzden çıkarınız ve avucunuza yerleştiriniz. Her bir lens yüzeyine birkaç damla **cleadew GP hydra one** damlatınız ve parmağınızla 20–30 kez ovalayınız. Her bir lensi yeni **cleadew GP hydra one** ile 5 saniye boyunca iyice durulayınız.

2 DEZENFEKSİYON

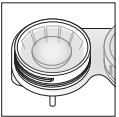

- Lens kapını **cleadew GP hydra one** ile doldurun ve lensleri lens kabına yerleştiriniz ve lens kabını sıkıca kapatınız. Takmaya hazır olana kadar lensleri en az 4 saat (veya bir gece) bekletiniz.

3a KORNEA LENSLERİNİN DURULANMASI VE TAKILMASI

- Kornea GP lenslerini takmadan önce 5 saniye boyunca **cleadew GP hydra one** ile durulayın.

3b ÖZEL LENSLERİN DURULANMASI VE TAKILMASI (SKLERAL LENSLERİN VEYA ORTOKERATOLOJİ LENSLERİNİN)

- Özel lens (skleral lensler veya ortokeratoloji/Orto K lensleri) kullanıcıları için, lensleri göze takmadan önce steril salin veya uygun bir lens dolum çözülüsünü kullanarak yaklaşık 5 saniye boyunca iyice durulamanız gerekir.
- Skleral veya Orto K lensleri için takma veya durulama çözülüsünü olarak **cleadew GP hydra one** kullanmayın. Lenslerinizi takarken her zaman steril salin veya göz doktorunuz tarafından özellikle önerilen başka bir takma çözülüsünü kullanın.

4 LENS KABINI YIKAMA

- Lens bakımından sonra, lens kabını **cleadew GP hydra one** ile durulayın ve kurumaya bırakınız.

SAKLAMA

- Lensler açılmamış lens kabında en fazla 30 gün saklanabilir. Lensler daha uzun süre saklanırsa, her 30 günde bir ve lenslerinizi takmadan önce yeni **cleadew GP hydra one** ile değiştiriniz.

⚠ İKAZLAR

- **cleadew GP hydra one**'de kullanılan bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa **cleadew GP hydra one** kullanmayınız.
- Sürekli göz rahatsızlığı, aşırı yaşarma, görme değişiklikleri veya gözde kızarıklık oluşursa, lenslerinizi derhal çıkarınız ve göz doktorunuza veya bir göz bakım pratisyenine danışınız.
- **cleadew GP hydra one**'yi herhangi bir göz ilacı veya diğer kontakt lens bakım ürünleriyle birlikte kullanmayınız.
- **cleadew GP hydra one**'i özel lensler (skleral veya ortokeratoloji lensleri) için yerleştirme veya durulama çözülüsünü olarak kullanmayın.

⚠ UYARILAR

- **cleadew GP hydra one**'yi kullanmadan önce bu talimat sayfasını dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayınız. Göz enfeksiyonlarını önlemek için her zaman kullanıcı talimatlarına uyunuz.
- **cleadew GP hydra one**'i **ÖZEL LENSLER (SKLERAL VEYA ORTOKERATOLOJİ LENSLERİ)** ile kullanırken bu talimatlara uymaya özellikle dikkat edin.
- Solüsyonu tekrar kullanmayın; her kullanımdan sonra lens kabında kalan **cleadew GP hydra one** solüsyonunu atın.
- Çocuklar **cleadew GP hydra one**'yi kendi başlarına kullanmamalıdır; ebeveynlerin günlük bakımından sorumlu olmaları istenmektedir.
- Şişeyi aştıktan 3 ay sonra kalan solüsyonunu atınız.
- Kullandıktan sonra şişeyi sıkıca kapatınız.
- Yumuşak kontakt lensler için kullanmayınız.
- Solüsyonunu yutmayınız.
- Kirlenmeyi önlemek için **cleadew GP hydra one**'nin ucuna dokunmayınız.
- **cleadew GP hydra one**'yi ısı dezenfeksiyonu için kullanmayınız.
- Son kullanma tarihinden sonra **cleadew GP hydra one** ile kullanmayınız.
- Renği değişmişse solüsyonu kullanmayınız.
- Koruma etiketi hasarlı veya yoksa **cleadew GP hydra one**'yi kullanmayınız.
- Lensleri saklamak ve durulamak için musluk önce bu talimat sayfasını dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayınız. Göz enfeksiyonlarını önlemek için her zaman kullanıcı talimatlarına uyunuz.
- Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
- Ürünleri doğrudan güneş ışığından koruyarak oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayınız.
- Bakteriyel kontaminasyonu önlemek için solüsyonu başka bir kaba aktarmayınız, su veya başka bir sıvı tıbbi madde ile doldurmayınız.
- **cleadew GP hydra one**'yi eski bir lens kabı ile kullanmayınız.
- Her zaman yeni verilen lens kabını kullanınız.
- Göz bakım uzmanına danışmadan kontakt lens bakım sisteminizi göz doktoru.
- Şişeyi aştıktan 3 ay sonra kalan solüsyonunu atınız.
- Borik asit üremeye karşı toksiktir ve çocuklar tarafından içilirse gelecekteki doğurganlığı azaltabilir veya hamile veya emziren kadınlar tarafından içilirse bebeklere zarar verebilir. Bu ürün de borik asit içermesine rağmen, bu üründeki borik asit miktarı sağlık açısından tehlike oluşturmayacak bir yoğunluktadır. Bu ürün, ürün talimatlarına uyulduğu sürece çocuklar ve hamile veya emziren kadınlar tarafından güvenli kullanılabilir. Kimyasallara karşı hassasiyet kişiden kişiye farklılık gösterir. Hassas kişilerin lensi takmadan önce steril salin solüsyonuyla durulamaları tavsiye edilir.

BİLEŞENLER

cleadew GP hydra one
Polihexametilen biguanid hidroklorür (%0,0005)



Koruyucu olarak Hidrojen peroksit (%0,004)
Borik asit

cleadew
GP hydra one

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State of the EU.

OPHTECS Europe B.V.
Marithaime 20, 6662 WD Elst, The Netherlands
+31 (0)263 54 44 44
info@ophtecs-europe.com

MADE IN JAPAN

MD **CE 2797**

OPHTECS Europe B.V.
Marithaime 20, 6662 WD Elst, The Netherlands

OPHTECS CORPORATION
5-2-4 Minatojima Minamimachi, Chuo-ku, Kobe, 650-0047 Japan

www.ophtecs.com

ISSUE DATE: 20221121
REVISE DATE: 20260601
3-2607001