

Disinfecting, cleaning and storing system for rigid gas permeable contact lenses.

FOR ALL RIGID GAS PERMEABLE CONTACT LENSES

Rinse the lenses with **cleadew CareSolution** or other rinsing solutions (sterile saline solution, rinsing solutions for contact lenses, and multipurpose solutions [MPSs] for soft contact lenses) when wearing the lenses after care as required by this lens care system. Avoid using solutions containing sodium chlorite (for example, LENS Plus [Ocupure] or REGARD).

Wash your hands well with mild soap before handling your contact lenses.


Use the special lens case included (do not use any other lens cases).

1 DISINFECTING, CLEANING AND NEUTRALIZING



- Place the lenses into the case's lens holders.
- Close the case lid on one side, put a neutralizing and cleaning tablet in, and fill up to 90% of the case with the orange disinfecting solution.
- Failure to add the tablet may result in staining of the lenses. Be careful and do not forget to add the tablet to the lens case.
- Do not turn the lens case upside down after adding the tablet.
- Close the lid on the other side tightly.
- Soak the lenses for over four hours (or overnight).
- Allow the lenses to stand at room temperature since it may take time to neutralize the lenses at low temperatures.

2 RINSING LENSES

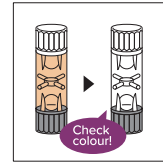

- Confirm that the lenses and the solution are clear.
- Open the lid on one side and discard the solution in the lens case.
- Pick up the cleaned/disinfected lenses from the holder. Hold them with your fingers and rinse both sides with **cleadew CareSolution** or sterile saline solution for **at least 10 seconds**.
- If you fail to rinse the lenses or your rinsing was not thorough enough, the lenses may cause eye irritation. Be sure to rinse the lenses thoroughly.

3 WASHING LENS CASE

- After the care of the lenses is completed, wash the lens case with **cleadew CareSolution** or sterile saline solution and allow it to air dry.

STORING LENSES

- Store the lenses at room temperature after disinfecting, cleaning, and neutralizing with **cleadew GP**.
- Do not open the case until using the lenses.
- To store the lenses for 30days or longer, disinfect and clean with **cleadew GP** in accordance with Disinfecting, Cleaning and Neutralizing procedure as above every 30 days.
- Rinse the lenses with **cleadew CareSolution** or sterile saline solution before wearing them in accordance with the rinsing lens procedure.

PRECAUTIONS

- To avoid serious eye infections or damage, always follow the user instructions.
- Do not use the product if you are allergic to any of the ingredients used in it.
- If you experience such symptoms as eye pain and irritation, remove your lenses immediately and consult your eye doctor or an eye care practitioner.
- Always use the **cleadew GP** system components including the lens case.
- Use the disinfecting solution and the neutralizing and cleaning tablet together.
- Do not use the product together with another solution, tablet, or pharmaceutical drug.
- After using up all of the neutralizing and cleaning tablets, discard any remaining solution in the bottle.
- Do not use for soft contact lenses.
- Do not use the product if the bottle or package is soiled or damaged.
- Do not use the tablet if it is damaged or discoloured.
- Do not use the solution if it is cloudy or its colour is a colour other than orange due to discoloration.
- Do not wear lenses without rinsing them with **cleadew CareSolution** or sterile saline solution after disinfecting, cleaning and neutralizing.
- Do not reuse the solution. (The solution after lens care is neutralized and cannot disinfect the lens. To prevent eye infection, do not reuse the solution.)
- Do not use the product after the expiry date.
- Discard any remaining solution 90 days after opening the bottle.
- Use the tablets immediately after opening the package.
- Do not touch the tip of the bottle to avoid contamination.
- Close the bottle tightly after use.
- Do not transfer the solution to another bottle or case.
- Do not use tap water to rinse the lenses or lens case.
- Keep out of reach of children.
- Store products in a dry place at room temperature, avoiding direct sunlight.
- To prevent contamination, use a new lens case with each purchase.
- If the solution adheres to your clothes, wash with water immediately.
- Rinse off any remaining solution on the wash stand with water after each use to prevent staining on the surface of the wash stand.
- Do not swirl the solution or tablet. If you do so, drink a large amount of drinking water immediately.
- Not to be used in the eye. If you do so, immediately rinse the eye with sterile saline solution or eye washes.
- Do not change the contact lens care system without consulting your eye care professional.
- Boric acid is toxic to reproduction and can reduce future fertility if taken by children or harm babies if taken by pregnant or lactating women. Although this product also contains boric acid, the amount of boric acid in this product is at a concentration that does not pose a health hazard. This product is safe for use by children and pregnant or lactating women as long as the product's directions are followed. Sensitivity to chemicals differs from person to person. For sensitive individuals, the recommendation is to rinse the lens with sterile saline solution before wearing.

INGREDIENTS

- [Disinfecting solution] Povidone-iodine (0.05%)
- Boric acid
- [Neutralizing and cleaning tablet] Sodium sulfite (2.4 mg/tablet), Proteolytic enzyme (8.0 mg/tablet)

Système de désinfection, de nettoyage et de conservation pour lentilles de contact rigides perméables au gaz.

POUR TOUS LES TYPES DE LENTILLES DE CONTACT RIGIDES PERMÉABLES AU GAZ

Rincer les lentilles avec **cleadew CareSolution** ou une autre solution de rinçage (solution saline stérile, solution de rinçage pour lentilles de contact ou solution polyvalente [MPS] pour lentilles de contact) lors du port des lentilles après les avoir entretenues conformément à ce système d'entretien des lentilles. Éviter d'utiliser des solutions contenant du chlorite de sodium (par exemple, LENS Plus [Ocupure] ou REGARD).

Bien se laver les mains avec un savon doux avant de manipuler les lentilles.


Utiliser l'étui à lentilles spécial fourni (ne pas utiliser d'autre étui à lentilles).

1 DÉSINFECTER, NETTOYER ET NEUTRALISER



- Placez les lentilles sur le support de l'étui à lentilles.
- Refermez le couvercle d'un côté, ajoutez un comprimé neutralisant et nettoyeur, puis remplissez l'étui à 90 % avec la solution orange désinfectante.
- Si le comprimé n'a pas été ajouté, les lentilles risquent d'être tachées. Prenez garde de ne pas oublier d'insérer le comprimé dans l'étui à lentilles.
- Ne mettez pas l'étui à lentilles à l'envers après y avoir ajouté le comprimé.
- Refermez l'étui soigneusement de l'autre côté.
- Laissez tremper les lentilles dans leur étui pendant plus de 4 heures (ou toute une nuit).
- Laissez les lentilles reposer à température ambiante, car leur neutralisation peut nécessiter plus de temps à basse température.

2 RINCER LES LENTILLES DE CONTACT

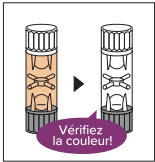

- S'assurer que les lentilles et la solution sont incolores.
- Ouvrez le couvercle d'un côté et jetez la solution de l'étui à lentilles.
- Retirez les lentilles nettoyées/désinfectées du support. Tenez-les entre vos doigts et rincez les deux côtés avec **cleadew CareSolution** ou une solution saline stérile pendant **au moins 10 secondes**.
- Ne pas rincer les lentilles ou ne pas le faire convenablement peut provoquer une irritation des yeux. Assurez-vous de convenablement rincer les lentilles.

3 NETTOYER L'ÉTUI À LENTILLES

- Une fois les lentilles nettoyées, lavez l'étui à lentilles à l'aide de **cleadew CareSolution** ou une solution saline stérile et laissez-le sécher à l'air libre.

CONSERVER LES LENTILLES DE CONTACT

- Conservez les lentilles à température ambiante après désinfection, nettoyage et neutralisation avec **cleadew GP**.
- N'ouvrez pas l'étui à lentilles jusqu'à leur utilisation.
- Afin de conserver les lentilles pendant 30 jours ou plus, il faut les désinfecter et nettoyer avec **cleadew GP**, selon la procédure de désinfection, de nettoyage et de neutralisation ci-dessus, tous les 30 jours.
- Rincez les lentilles avec **cleadew CareSolution** ou une solution saline stérile selon la procédure de rinçage avant de les porter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Afin d'éviter toute infection ou lésion oculaire grave, il est important de suivre les consignes d'utilisation.
- N'utilisez pas de produit en cas d'allergie à l'un des ingrédients utilisés dans sa composition.
- En cas de symptômes comme des douleurs ou des irritations aux yeux, retirez les lentilles immédiatement et consultez un ophtalmologiste ou un spécialiste de soins oculaires.
- Utilisez toujours les produits **cleadew GP** system, y compris l'étui à lentilles.
- Utilisez toujours ensemble la solution désinfectante et le comprimé neutralisant et nettoyeur.
- N'utilisez pas ce produit avec une autre solution, ou un autre comprimé ou médicament.
- Une fois que la totalité des comprimés neutralisants et nettoyeurs ont été utilisés, jetez toute solution restante dans le lavabo afin d'éviter qu'il ne soit pas taché.
- N'ayez pas la solution ou le comprimé. Le cas échéant, boire de l'eau potable abondamment et immédiatement.
- Ne pas utiliser dans les yeux. Si le produit entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement avec une solution saline stérile non tamponnée et sans agent de conservation ou avec un liquide de rinçage oculaire.
- Ne changez pas de système de nettoyage de lentilles de contact sans consulter un professionnel de la vue.
- L'acide borique est toxique pour la reproduction et peut réduire la fertilité dans le futur s'il est absorbé par des enfants ou nuire aux bébés s'il est absorbé par des femmes enceintes ou allaitantes. Bien que ce produit contienne également de l'acide borique, la concentration de celui-ci dans le produit n'implique aucun danger pour la santé. Ce produit peut être utilisé en toute sécurité par les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes, tant que ses consignes d'utilisation sont respectées. La sensibilité aux produits chimiques diffère d'une personne à l'autre. Pour les personnes sensibles, il est recommandé de rincer les lentilles avec une solution saline stérile avant de les mettre.
- N'utilisez pas le produit après la date d'expiration.
- Jetez la solution au bout de 90 jours après l'ouverture du flacon.
- Utilisez les comprimés directement après ouverture.
- Ne touchez pas l'embout du flacon afin d'éviter toute contamination.

INGRÉDIENTS

- [Solution désinfectante] Povidone iodée (0,05 %)
- Acide borique
- [Comprimé neutralisant et nettoyeur] Sulfite de sodium (2,4 mg/comprimé), Enzyme protéolytique (8,0 mg/comprimé)

Desinfektions-, Reinigungs- und Aufbewahrungssystem für formstabile gasdurchlässige Kontaktlinsen.

FÜR ALLE FORMSTABILEN GASDURCHLÄSSIGEN KONTAKTLINSEN

Spülen Sie die Linsen mit **cleadew CareSolution** oder anderen Spüllösungen (sterile Kochsalzlösung, Spüllösungen für Kontaktlinsen und Mehrzwecklösungen [MPS] für weiche Kontaktlinsen) ab, wenn Sie die Linsen nach der Pflege gemäß diesem Linsenpflegesystem tragen. Vermeiden Sie die Verwendung von Lösungen, die Natriumchlorit enthalten (z. B. LENS Plus [OcuPure] oder REGARD).

Vor dem Kontakt mit den Kontaktlinsen reinigen Sie Ihre Hände gründlich mit einer milden Handwaschseife.


Verwenden Sie den mitgelieferten speziellen Kontaktlinsenbehälter (verwenden Sie keine anderen Kontaktlinsenbehälter).

DESINFEKTION, REINIGUNG UND NEUTRALISATION



- Platzieren Sie die Linsen in der Linsenhalterung des Kontaktlinsenbehälters.
- Schließen Sie den Behälterdeckel auf einer Seite, geben Sie eine Neutralisations- und Reinigungs-tablette hinein und füllen Sie den Behälter zu 90 % mit der orangefarbenen Desinfektionslösung.
- Falls die Tablette nicht hineingegeben wird, kann es zu einer Verfärbung der Linsen kommen. Seien Sie vorsichtig und vergessen Sie nicht, die Tablette in den Kontaktlinsenbehälter hineinzugeben.
- Drehen Sie den Kontaktlinsenbehälter nicht um, nachdem Sie die Tablette hineingegeben haben.
- Verschließen Sie fest den Deckel nach Gebrauch auf der anderen Seite.
- Weichen Sie die Linsen mehr als vier Stunden (oder über Nacht) ein.
- Lassen Sie die Linsen bei Raumtemperatur stehen, da das Neutralisieren bei niedrigen Temperaturen einige Zeit dauern kann.

KONTAKTLINSEN ABSPÜLEN

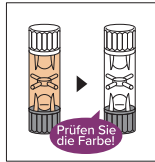

- Nach der Neutralisationszeit achten Sie bitte darauf, dass sowohl die Flüssigkeit als auch die Kontaktlinsen transparent sind.
- Öffnen Sie den Deckel auf einer Seite und entsorgen Sie die Lösung des Kontaktlinsenbehälters.
- Nehmen Sie die gereinigten/desinfizierten Linsen aus dem Halter. Halten Sie sie mit den Fingern fest und spülen Sie beide Seiten **mindestens 10 Sekunden lang** mit **cleadew CareSolution** oder steriler Kochsalzlösung ab.
- Falls Sie die Linsen nicht abspülen oder das Spülen gründlich genug erfolgt, können die Linsen Augenreizungen verursachen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die Linsen gründlich abspülen.

REINIGEN DES KONTAKTLINSENBEHÄLTERS

- Waschen Sie den Kontaktlinsenbehälter nach Abschluss der Kontaktlinsenpflege mit **cleadew CareSolution** oder steriler Kochsalzlösung und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

KONTAKTLINSEN AUFBEWAHREN

- Behalten Sie die Kontaktlinsen nach Desinfektion, Reinigung und Neutralisation mit **cleadew GP** bei Zimmertemperatur auf.
- Öffnen Sie den Kontaktlinsenbehälter erst, sobald Sie die Kontaktlinsen benutzen möchten.
- Um Kontaktlinsen 30 oder mehr Tage aufzubewahren, desinfizieren und reinigen Sie diese mit **cleadew GP** anhand des oben beschriebenen Desinfektions-, Reinigungs und Neutralisierungsprozesses.
- Spülen Sie die Linsen vor dem Einsetzen mit **cleadew CareSolution** oder steriler Kochsalzlösung, entsprechend dem beschriebenen Verfahren zum Spülen der Kontaktlinsen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie sich immer an die Gebrauchsanweisungen, um schwere Augeninfektionen oder Schäden zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren.
- Sollten Schmerzen bzw. Reizung der Augen auftreten, entfernen Sie sofort Ihre Kontaktlinsen vom Auge und suchen Ihren Augenarzt auf.
- Benutzen Sie immer die Komponenten des **cleadew GP** Systems einschließlich des Kontaktlinsenbehälters.
- Benutzen Sie bitte immer nur die desinfizierende Lösung zusammen mit der neutralisierenden und reinigenden Tablette.
- Benutzen Sie das Produkt nicht zusammen mit anderen Lösungen, Tabletten oder pharmazeutischen Produkten.
- Nachdem die gesamte Menge der Neutralisations- und Reinigungs-tabletten aufgebraucht sind, entsorgen Sie die restliche Lösung aus der angebrochenen Flasche.
- Nicht für weiche Kontaktlinsen geeignet.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn die Flasche oder Verpackung verschmutzt oder beschädigt ist.
- Verwenden Sie die Tablette nicht, wenn Sie beschädigt oder verfärbt ist.
- Benutzen Sie die Lösung nicht, wenn Sie trüb oder die Farbe aufgrund von Verfärbung nicht orange ist.
- Bitte tragen Sie nur Kontaktlinsen, die nach der Desinfektion und Neutralisation mit **cleadew CareSolution** oder steriler Kochsalzlösung gespült wurden.
- Verwenden Sie die Lösung nicht erneut. (Die Lösung nach der Linsenpflege ist neutralisiert und kann die Linse nicht desinfizieren. Um eine Augeninfektion zu vermeiden, verwenden Sie die Lösung nicht erneut).
- Benutzen Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.
- Schützen Sie die Reste der Lösung 90 Tage nach dem Öffnen der Flasche weg.
- Tabletten nach Öffnen der Verpackung unverzüglich verwenden.
- Berühren Sie bitte nicht die Spitze der Flasche, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- Die Flasche nach Gebrauch fest verschließen.
- Füllen Sie die Lösung nicht in eine andere Flasche oder einen anderen Behälter.
- Kontaktlinsen oder Kontaktlinsenbehälter nicht mit Leitungswasser spülen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bewahren Sie die Produkte an einem trockenen Platz bei Raumtemperatur auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, benutzen Sie bei jedem Kauf einer Flasche einen neuen Kontaktlinsenbehälter.
- Sollte die Lösung auf Ihre Kleidung gelangen, waschen Sie diese sofort mit Wasser ab.
- Nach Kontakt mit dem Pflegemittel reinigen Sie bitte Ihr Waschbecken, um hartnäckige Flecken auf der Oberfläche zu vermeiden.
- Verschließen Sie nicht die Lösung oder die Tablette. Im Falle des Verschluckens umgehend eine große Menge Trinkwasser zu sich nehmen.
- Direkten Kontakt der Desinfektionslösung mit den Augen vermeiden. Falls die Lösung ins Auge gelangt, das Auge umgehend mit einer ungefilterten, konservierungsmittelfreien und sterilen Kochsalzlösung oder einem Augenreinigungsmittel gründlich spülen.
- Wechseln Sie Ihr Kontaktlinsenpflegesystem nur nach fachkundiger Beratung.
- Borsäure ist fortpflanzungsgefährdend und kann bei Einnahme durch Kinder die zukünftige Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder bei Einnahme durch schwangere oder stillende Frauen das Kind schädigen. Obwohl dieses Produkt auch Borsäure enthält, liegt die Menge an Borsäure in diesem Produkt in einer Konzentration vor, die keine Gesundheitsgefährdung darstellt. Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Kinder sowie schwangere bzw. stillende Frauen sicher, sofern die Anweisungen des Produkts befolgt werden. Die Empfindlichkeit gegenüber Chemikalien ist von Person zu Person unterschiedlich. Für empfindliche Personen empfiehlt es sich, die Linse vor dem Tragen mit steriler Kochsalzlösung abzuspülen.

INHALTSSTOFFE

- [Desinfizierende Lösung] Povidon-iod (0,05 %)
- Borsäure
- [Neutralisations- und Reinigungs-tablette] Natriumsulfit (2,4 mg/tablette), Proteolytisches Enzym (8,0 mg/tablette)

Sistema de desinfección, limpieza y almacenamiento para lentes de contacto rígidas permeables al gas.

PARA TODAS LAS LENTES DE CONTACTO RÍGIDAS PERMEABLES AL GAS

Aclarar las lentes con la solución **cleadew CareSolution** u otras soluciones de aclarado (solución salina estéril, soluciones de aclarado para lentes de contacto y soluciones multiuso [MPS] para lentes de contacto blandas) cuando las lleve puestas después de haberlas cuidado como requiere este sistema de mantenimiento de lentes. Evite utilizar soluciones que contengan clorito sódico (por ejemplo, LENS Plus [Ocupure] o REGARD).

Lávase bien las manos con jabón neutro antes de manipular sus lentes de contacto.


Utilice el estuche especial para lentes que se incluye (no utilice ningún otro estuche para lentes).

CÓMO DESINFECTAR, LIMPIAR Y NEUTRALIZAR



- Coloque sus lentes en el portalentes del estuche.
- Cierre la tapa del estuche por un lado, introduzca un comprimido neutralizante y límpiado y luego llene hasta 90% del estuche con la solución desinfectante de color anaranjado.
- No añadir el comprimido puede manchar las lentes. Tenga cuidado y no olvide añadir el comprimido al estuche de las lentes.
- No ponga el estuche boca abajo después de añadir el comprimido.
- Cierre firmemente la tapa por el otro lado.
- Deje las lentes en remojo durante cuatro horas (o toda la noche).
- Deje reposar las lentes a temperatura ambiente, ya que puede llevar tiempo neutralizarlas a bajas temperaturas.

ENJUAGAR LAS LENTES

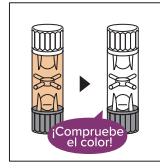

- Asegúrese de que la solución y las lentes están transparentes.
- Abra la tapa del estuche por un lado y vacíelo de solución.
- Coja las lentes limpiadas/desinfectadas del portaelentes. Sujételas con los dedos y enjuáguelas por ambos lados con **cleadew CareSolution** o una solución salina estéril durante **al menos 10 segundos**.
- Si no aclara las lentes o si el aclarado no es lo suficientemente exhaustivo, las lentes pueden provocar irritación ocular. Asegúrese de aclarar bien las lentes.

CÓMO LAVAR EL ESTUCHE PARA LENTES

- Después de acabar el cuidado de sus lentes, lave el estuche con **cleadew CareSolution** o solución salina estéril y deje que se seque al aire.

GUARDAR LAS LENTES

- Conserve sus lentes a temperatura ambiente después de haberlas desinfectado, limpiado y neutralizado con **cleadew GP**.
- No abra el estuche si no tiene la intención de utilizar las lentes.
- Al conservar las lentes durante 30 días o más tiempo, asegúrese de desinfectarlas y limpiarlas cada 30 días con **cleadew GP** de acuerdo con el procedimiento de desinfección, limpieza y neutralización descrito arriba.
- Antes de aplicárselas, enjuague las lentes con **cleadew CareSolution** o una solución salina estéril de acuerdo con el procedimiento de enjuague.

PRECAUCIONES

- Para evitar infecciones o daño graves en los ojos, siga siempre las instrucciones de uso.
- No utilice el producto si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.
- Si tiene síntomas como dolor o irritación oculares, quítese las lentes inmediatamente y consulte con su oftalmólogo o un profesional de la visión.
- Utilice siempre los componentes del sistema **cleadew GP** junto con el estuche para lentes.
- Utilice juntos la solución desinfectante y los comprimidos neutralizantes y limpiadores.
- No utilice el producto con otra solución, otro comprimido u otro fármaco.
- Después de agotar todos los comprimidos neutralizantes y limpiadores, deseché la cantidad de solución que quede en el bote.
- No utilice el producto con lentes de contacto blandas.
- No utilice el producto si el bote o el envoltorio están sucios o dañados.
- No utilice el comprimido si está dañado o descolorido.
- No utilice la solución si está turbia o tiene un color distinto al anaranjado, debido a la decoloración.
- No use sus lentes sin antes enjuagarlas con **cleadew CareSolution** o una solución salina estéril después de haberlas desinfectado, limpiado y neutralizado.
- No reutilice la solución. (La solución después del cuidado de la lente está neutralizada y no puede desinfectar la lente. Para evitar una infección ocular, no reutilice la solución).
- No utilice el producto después de su fecha de caducidad.
- Deseché la cantidad de solución que quede 90 días después de abrir el bote.
- Utilice los comprimidos inmediatamente después de abrir el envoltorio.
- No toque la punta del bote para evitar la contaminación.
- Cierre el bote firmemente después de cada uso.
- No transfiera la solución a otro bote o estuche.
- No utilice agua del grifo para enjuagar sus lentes o el estuche para lentes.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Conserve los productos en un lugar seco, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
- Utilice un nuevo estuche con cada compra del producto para evitar la contaminación.
- Si la solución se adhiere a la ropa, lave la ropa inmediatamente con agua.
- Enjuague con agua la cantidad de solución que quede en el lavabo después de cada uso para evitar manchas en la superficie del lavabo.
- No se trague la solución o el comprimido. Si lo hace, beba inmediatamente agua potable en abundancia.
- Evite el contacto directo con los ojos. Si lo hubiera, enjuague el ojo con solución salina estéril, sin conservantes y no tamponada o colirio de inmediato.
- No cambie el sistema para el cuidado de sus lentes de contacto sin antes consultar con su profesional de la visión.
- El ácido bórico es tóxico para la reproducción y puede reducir la fertilidad futura si lo toman niños o dañar a los bebés si lo toman mujeres embarazadas o en período de lactancia. Aunque este producto también contiene ácido bórico, la cantidad de ácido bórico en el mismo está en una concentración que no supone un peligro para la salud. Este producto puede ser utilizado sin peligro por niños y mujeres embarazadas o en período de lactancia siempre que se sigan las instrucciones del producto. La sensibilidad a los productos químicos varía de una persona a otra. Para las personas sensibles, la recomendación es enjuagar las lentes con solución salina estéril antes de usarlas.

INGREDIENTES

- [Solución desinfectante] Iodopovidona (0,05 %)
- Acido bórico
- [Comprimidos neutralizantes y limpiadores] Sulfito de sodio (2,4 mg/comprimido), Enzima proteolitica (8,0 mg/comprimido)

Sistema di disinfezione, pulizia e conservazione per lenti a contatto rigide gas permeabili.

PER TUTTE LE LENTI A CONTATTO RIGIDE GAS PERMEABILI.

Sciaguare le lenti con **cleadew CareSolution** o altre soluzioni di risciacquo (soluzione salina sterile, soluzione di risciacquo e soluzione multiuso [MPS] per lenti a contatto morbide) quando si indossano le lenti dopo il trattamento come richiesto da questo sistema per la cura delle lenti. Evitare l'uso di soluzioni contenenti clorito di sodio (ad esempio LENS Plus [Ocupure] o REGARD).

Lavare bene le mani con sapone neutro prima di toccare le lenti.


Utilizzare l'apposito portaelenti in dotazione (non utilizzare altri portaelenti).

DISINFETTARE, PULIRE E NEUTRALIZZARE



- Inserire le lenti nelle gabbiette del portaelenti.
- Chiudere il tappo di un'estremità del portaelenti, inserire una compressa per neutralizzazione e pulizia e aggiungere la soluzione disinfettante arancione fino a riempire il 90% del portaelenti.
- La mancata aggiunta della compressa potrebbe causare macchie sulle lenti. Prestare attenzione e non dimenticare di aggiungere la compressa nel portaelenti.
- Non capovolgere il portaelenti dopo aver aggiunto la compressa.
- Chiudere bene il tappo dell'altra estremità del portaelenti.
- Immergere le lenti per oltre 4 ore (o per tutta la notte).
- Lasciare le lenti a temperatura ambiente poiché potrebbe essere necessario molto tempo per neutralizzarle a basse temperature.

RISCIACQUARE LE LENTI

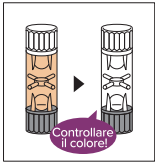

- Assicurarsi che soluzione e lenti siano completamente incolore.
- Aprire il tappo di un'estremità del portaelenti e gettare la soluzione contenuta all'interno.
- Sollevarle le lenti pulite/disinfettate dal supporto. Tenendole con le dita, risciacquare entrambi i lati con **cleadew CareSolution** o soluzione salina sterile per **almeno 10 secondi**.
- Se non si risciacquano le lenti o se il risciacquo non è stato sufficientemente accurato, le lenti potrebbero causare irritazione agli occhi. Assicurarsi di risciacquare le lenti accuratamente.

LAVARE IL PORTAELENTI

- Dopo aver completato la cura delle lenti, lavare il portaelenti con **cleadew CareSolution** o soluzione salina sterile e lasciare asciugare all'aria aperta.

CONSERVARE LE LENTI

- Conservare le lenti a temperatura ambiente dopo averle disinfettate, pulite e neutralizzate con **cleadew GP**.
- Aprire il portaelenti solo quando si desidera applicare le lenti.
- Per conservare le lenti per 1 mese o più a lungo, ogni 30 giorni disinfettare e pulire con **cleadew GP** come indicato nella sezione "Disinfettare, pulire e neutralizzare".
- Prima di applicare le lenti, risciacquarle con **cleadew CareSolution** o soluzione salina sterile come indicato per il risciacquo.

PRECAUZIONI

- Per evitare gravi infezioni o lesioni oculari, seguire sempre le istruzioni per l'uso.
- Non utilizzare in caso di allergia agli ingredienti del prodotto.
- In caso di sintomi quali dolori o irritazioni agli occhi, rimuovere immediatamente le lenti e consultare il proprio oculista o uno specialista.
- Usare il sistema **cleadew GP** sempre e solo con i suoi componenti incluso il portaelenti.
- Utilizzare sempre insieme la soluzione disinfettante e la compressa pulente.
- Non utilizzare il prodotto con altre soluzioni, compresse o medicinali.
- Una volta utilizzate tutte le compresse pulenti e neutralizzanti, gettare la soluzione residua nel flacone.
- Non utilizzare il prodotto con lenti a contatto morbide.
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore o la confezione sono sporchi o danneggiati.
- Non utilizzare compresse danneggiate o scolorite.
- Non utilizzare se la soluzione non è limpida o se il colore è sbiadito e non è più arancione.
- Non indossare le lenti se non sono state risciacquate con **cleadew CareSolution** o soluzione salina sterile dopo la disinfezione, pulizia e neutralizzazione.
- Non riutilizzare la soluzione. (Dopo il trattamento delle lenti, la soluzione è neutralizzata e non è più in grado di disinfettare. Per evitare infezioni oculari, non riutilizzare la soluzione).
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.
- Eliminare l'eventuale soluzione rimanente 90 giorni dopo l'apertura del flacone.
- Utilizzare le compresse immediatamente dopo l'apertura della confezione.
- Non toccare la punta del flacone per evitare che possa infettarsi.
- Chiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Non travasare la soluzione in altri contenitori o flaconi.
- Non utilizzare acqua del rubinetto per risciacquare le lenti o il portaelenti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare i prodotti in un luogo asciutto a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare.
- Per evitare rischi di infezione, a ogni acquisto del prodotto utilizzare un portaelenti nuovo.
- Se la soluzione dovesse finire sugli abiti, lavare subito con acqua corrente.
- Se rimangono gocce di soluzione sul lavandino, risciacquare con acqua per evitare che si macchi.
- Non ingerire la soluzione o le compresse. In caso di ingestione, bere subito acqua in abbondanza.
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, risciacquare immediatamente con soluzione salina sterile, non tamponata, non conservata o colirio.
- Non cambiare il sistema di cura delle lenti a contatto senza aver prima consultato il proprio specialista.
- L'acido bórico è tossico per la riproduzione e può ridurre la fertilità futura se assunto da bambini o causare danni a neonati se assunto da donne in gravidanza o durante l'allattamento. Sebbene questo prodotto contenga anche acido bórico, la sua quantità è a una concentrazione tale da non rappresentare un pericolo per la salute. Questo prodotto è sicuro per l'uso da parte di bambini e donne in gravidanza o in allattamento, purché vengano seguite le istruzioni. La sensibilità alle sostanze chimiche varia da persona a persona. Per i soggetti sensibili, si raccomanda di sciacquare le lenti con soluzione fisiologica sterile prima di indossarle.

INGREDIENTI

- [Soluzione disinfettante] Iodopovidone (0,05%)
- Acido borico
- [Comprese pulenti e neutralizzanti] Solfito di sodio (2,4 mg/compressa), Enzima proteolitica (8,0 mg/compressa)