

Systeem voor het desinfecteren, reinigen, spoelen en bewaren van harde contactlenzen die gas doorlaten.

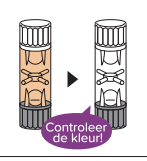
VOOR ALLE HARDE CONTACTLENZEN DIE GAS DOORLATEN

Was uw handen zeer goed met een milde zeep alvorens uw lenzen aan te raken.

1 DESINFECTEREN, REINIGEN EN NEUTRALISEREN

- 
- Plaats de lenzen in de lenshouders van het lenzenbakje.
 - Sluit de dop aan één kant, plaats een tablet voor het neutraliseren en reinigen en vul het lenzenbakje tot 90% met de oranje vloeistof voor desinfecteren.
 - Sluit vervolgens de dop aan de andere kant goed.
 - Laat de lenzen meer dan 4 uur (of een nacht) weken.
 - Controleer of de lenzen en vloeistof helder zijn.

2 LENZEN SPOELEN

- 
- Open de dop aan één kant en gooi de vloeistof uit het lenzenbakje weg.
 - Neem de gereinigde/gedesinfecteerde lenzen uit de lenzenhouder. Houd ze op uw vingers vast en spoel beide kanten met de spoeloplossing gedurende minstens 10 seconden.
 - Gebruik altijd de **cleadew CareSolution** om de lenzen te spoelen.
 - Vermijd het gebruik van saline of MPS-oplossingen die natrium chloriet bevatten als conserveringsmiddel of ontsmettingsmiddel.

3 REINIGEN VAN DE LENSHOUDER

- Was de lenshouder met **cleadew CareSolution** en laat het drogen met lucht na het verzorgen van de lenzen.

LENZEN BEWAREN

- Bewaar de lenzen na het desinfecteren, reinigen en neutraliseren met **cleadew GP** bij kamertemperatuur.
- Open het lenzenbakje niet eerder dan direct voor gebruik.
- Wanneer de lenzen langer dan 30 dagen niet worden gebruikt moeten de lenzen iedere 30 dagen middels de aangegeven procedure voor het desinfecteren, reinigen en neutraliseren met **cleadew GP** worden gedesinfecteerd, en gereinigd.
- Spoel de lenzen af met **cleadew CareSolution** overeenkomstig de spoelprocedure alvorens ze te dragen.

VOORZORGEN

- 
- Volg de aanwijzingen voor gebruik nauwgezet op om mogelijke ernstige infecties of beschadigingen aan het oog te voorkomen.
 - Gebruik de vloeistof voor desinfecteren en de tablet voor neutraliseren en reinigen altijd in combinatie.
 - Sluit de fles na gebruik goed.
 - Gebruik altijd de componenten en het lenzenbakje en **cleadew CareSolution** van het **cleadew GP**-systeem.
 - Gooi resterende vloeistof 90 dagen na het openen van de fles weg.
 - Gebruik het product niet voor zachte contactlenzen.
 - Gebruik de **cleadew CareSolution** niet om lenzen te desinfecteren of te bewaren.
 - Voorkom vervuiling en besmetting en raak de punt van de fles niet aan.
 - Vloeistof of tablet niet inslikken. Indien ingeslikt, direct veel schoon water drinken.
 - Gebruik het product niet rechtstreeks in uw ogen. Indien het in uw ogen is gekomen, moeten de ogen direct met een steriele saline-oplossing of een oogspoeling worden gespoeld.
 - Gebruik geen tabletten die zijn beschadigd of verkleurd.
 - Gebruik de vloeistof niet opnieuw. (De vloeistof die overblijft na het onderhoud van de lenzen is geneutraliseerd en kan de lenzen niet meer desinfecteren. Gebruik de vloeistof niet opnieuw. Dit kan leiden tot infectie van de ogen).
 - Gebruik het product niet nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken.
 - Gebruik het product niet indien de fles of verpakking vuil of beschadigd is.
 - Gebruik de oplossing niet indien deze troebel of verkleurd is.
 - Draag de lenzen na het desinfecteren, reinigen en neutraliseren niet zonder de lenzen eerst met **cleadew CareSolution** te hebben gespoeld.
 - Gebruik het product niet met een andere vloeistof, tablet of farmaceutisch middel.
 - Gebruik geen kraanwater voor het spoelen van lenzen of de lenshouder.
- 
- Buiten bereik van kinderen houden.
 - Giet de vloeistof niet naar een andere fles of houder over.
 - Voorkom vervuiling en gebruik een nieuwe lenshouder na iedere aankoop van het product.
 - Gebruik de tabletten direct na het openen van de verpakking.
 - Gooi resterende vloeistof in de fles weg nadat alle tabletten voor het neutraliseren en reinigen zijn gebruikt.
 - Indien vloeistof op uw kleding is gekomen, moet het direct met water worden weggespoeld.
 - Spoel eventuele resterende vloeistof op de wasbak of ander oppervlak na gebruik met water af om vlekken te voorkomen.
 -  Bewaar het product op een droge plaats bij kamertemperatuur en uit het directe zonlicht.
 - Haal de lenzen direct uit uw ogen en raadpleeg een oogarts of contactlensspecialist in geval van symptomen zoals oogpijn of oogirritatie.
 - Gebruik het product niet indien u allergisch bent voor een van de in het product gebruikte bestanddelen.
 - Raadpleeg uw oogarts of contactlensspecialist alvorens van verzorgingssysteem voor contactlenzen te wisselen.
 - Wanneer u door uw **cleadew CareSolution** raakt, koop dan aanvullende units **cleadew CareSolution**.
 - Boorzuur is schadelijk voor de voortplanting en kan bij innname door kinderen de toekomstige vruchtbaarheid verminderen of bij innname door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Ondanks dat dit product boorzuur bevat, is de concentratie dermate laag dat het geen gezondheidsrisico vormt. Daarom kan dit product veilig gebruikt worden door kinderen en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven zolang de instructies voor juist gebruik van het product worden opgevolgd. Gevoeligheid voor chemicaliën verschilt per persoon. Indien u gevoelig bent, raden we aan de lenzen te spoelen in een steriele saline-oplossing alvorens de lenzen te dragen.

BESTANDDELEN

[Ontsmettingsvloeistof] Povidonjodium (0,05%)   Boorzuur

[Tablet voor neutraliseren en reinigen] Natriumsulfiet (2,4 mg/tablet),
Enzima proteolytica (8,0 mg/tablet)

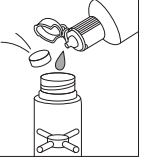
[Spoeloplossing] Waterstofperoxide als conserveermiddel (0,004%)   Boorzuur

Sistema de desinfecção, limpeza, enxaguamento e armazenamento para lentes de contacto rígidas permeáveis ao gás (RGP).

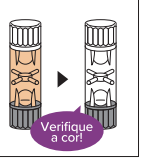
PARA TODAS AS LENTES DE CONTACTO RÍGIDAS PERMEÁVEIS AO GÁS

Lave cuidadosamente as mãos com sabão neutro antes de manusear as suas lentes de contacto.

1 DESINFECÇÃO, LIMPEZA E NEUTRALIZAÇÃO

- 
- Coloque as lentes nos respetivos suportes do estojo.
 - Feche a tampa de um dos lados do estojo, introduza um comprimido de neutralização e limpeza, e encha até 90% do estojo com a solução de desinfecção laranja.
 - Feche com firmeza a tampa do outro lado.
 - Deixe as lentes na solução desinfetante durante mais de quatro horas (ou durante a noite).
 - Verifique se as lentes e a solução estão limpas.

2 ENXAGUAR LENTES

- 
- Abra a tampa de um dos lados e despeje a solução do estojo das lentes.
 - Retire as lentes limpas/desinfetadas do suporte. Segure-as com os dedos e limpe os dois lados com o solução de limpeza durante pelo menos 10 segundos.
 - Use sempre o **cleadew CareSolution** para enxaguar as lentes.
 - Evite usar soluções salinas ou multiusos que contenham clorito de sódio como conservante ou desinfetante.

LAVAGEM DO ESTOJO DAS LENTES

- Após terminar o cuidado das lentes, lave o respetivo estojo com **cleadew CareSolution** e deixe-o a secar ao ar.

GUARDAR LENTES

- Armazene as lentes a temperatura ambiente após desinfetar, limpar e neutralizá-las com **cleadew GP**.
- Não abra a embalagem até utilizar as lentes.
- Para armazenar as lentes durante 30 ou mais dias, desinfete e limpe-as com **cleadew GP** de acordo com o procedimento de Desinfecção, Limpeza e Neutralização acima descrito a cada 30 dias.
- Enxague as lentes com **cleadew CareSolution** antes de usá-las de acordo com o procedimento de enxaguamento.

PRECAUÇÕES

- 
- Obedeça sempre às instruções de utilização de forma a evitar infeções oculares ou lesões.
 - Utilize a solução de desinfecção juntamente com os comprimidos de neutralização e limpeza.
 - Feche o recipiente com firmeza após a utilização.
 - Utilize sempre os componentes do sistema **cleadew GP** incluindo o estojo das lentes e o **cleadew CareSolution**.
 - Descarte a solução restante 90 dias após a abertura do recipiente.
 - Não utilize com lentes de contacto hidrofílicas.
 - Não utilize o **cleadew CareSolution** para desinfectar ou armazenar as lentes.
 - Não toque na tampa do recipiente de forma a evitar a contaminação.
 - Não ingira a lenzena ou lentes nem os comprimidos. Caso o fizer, beba imediatamente uma grande quantidade de água potável.
 - Não deve ser usado nos olhos. Caso o fizer, enxague imediatamente os olhos com solução salina estéril ou colírio.
 - Não utilize comprimidos danificados ou descolorados.
 - Não reutilize a solução. (Após o tratamento da lente, a solução fica neutralizada, o que impossibilita a respetiva desinfecção. Para prevenir a infeção ocular, não reutilize a solução).
 - Não utilize o produto uma vez expirada a data de validade.
 - Não utilize o produto se o recipiente ou embalagem estiverem sujos ou danificados.
 - Não utilize a solução se esta estiver turva ou descolorada.
 - Não use lentes que não tenham sido enxaguadas com **cleadew CareSolution** após a desinfecção, limpeza e neutralização.
 - Não utilize o produto juntamente com outra solução, comprimido ou medicamento.
 - Não utilize água da torneira para enxaguar as lentes ou o estojo.
- 
- Mantenha fora do alcance das crianças.
 - Não transfira a solução para outro recipiente ou estojo.
 - Para evitar a contaminação, utilize o estojo novo de lentes com cada aquisição.
 - Utilize os comprimidos imediatamente após a abertura da embalagem.
 - Descarte a solução restante no recipiente assim que tiver utilizado todas os comprimidos de neutralização e limpeza.
 - Se salpicar a sua roupa com a solução, lave imediatamente com água.
 - Enxague com água, no lavatório e após cada utilização, a solução restante no estojo de forma a que a superfície não fique manchada.
 - Armazene os produtos num local seco a temperatura ambiente, evitando a luz solar direta.
 - Caso sinta dor ou irritação nos olhos, retire imediatamente as lentes e consulte o seu médico ou profissional da visão.
 - Não utilize o produto caso tenha alergia a algum dos ingredientes nele contidos.
 - Não altere o sistema de cuidado das lentes sem consultar previamente um profissional da visão.
 - Se entretanto ficar sem **cleadew CareSolution**, adquira mais unidades deste produto.
 - O ácido bórico é tóxico para a reprodução e pode reduzir a fertilidade no futuro se ingerido por crianças ou prejudicar os bebés se ingerido por mulheres grávidas ou lactantes. Apesar de este produto também conter ácido bórico, a sua concentração não constitui um perigo para a saúde. O produto pode ser utilizado com segurança por crianças e mulheres grávidas ou a amamentar, desde que sejam seguidas as instruções de utilização. A sensibilidade aos produtos químicos varia de pessoa para pessoa. No caso de indivíduos sensíveis, recomenda-se a lavagem da lente com uma solução salina estéril antes da utilização.

COMPOSIÇÃO

[Solução de desinfecção] Iodopovidona (0,05%)   Ácido bórico

[Comprimidos de neutralização e limpeza] Sulfito de sódio (2,4 mg/comprimido),
Enzima proteolítica (8,0 mg/comprimido)

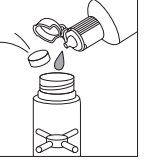
[Solução de limpeza] Peróxido de hidrogénio como conservante (0,004%)   Ácido bórico

Σύστημα απολύμανσης, καθαρισμού, έκπλυσης και αποθήκευσης για άκαμπτους αεριοδιαπερατούς φακούς επαφής.

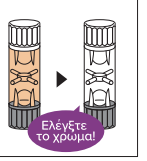
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΚΑΜΠΤΟΥΣ ΑΕΡΙΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ

Πλύνετε καλά τα χέρια σας με ήπιο σαπούνι πριν αγγίξετε τους φακούς επαφής σας.

1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ

- 
- Τοποθετήστε τους φακούς στη βάση φακών της θήκης.
 - Κλείστε το καπάκι της θήκης από τη μία πλευρά, τοποθετήστε ένα δίσκιο εξουδετέρωσης και καθαρισμού και γεμίστε έως και το 90% της θήκης με το πορτοκαλί απολυμαντικό διάλυμα.
 - Κλείστε καλά το καπάκι από την άλλη πλευρά.
 - Εμβάψιτε τους φακούς για πάνω από τέσσερις ώρες (ή όλη τη νύχτα).
 - Επιβεβαιώστε ότι οι φακοί και το διάλυμα είναι διάφανα.

ΕΚΠΛΥΣΗ ΦΑΚΩΝ

- 
- Ανοίξτε το καπάκι από τη μία πλευρά και απορρίψτε το διάλυμα στη θήκη φακών.
 - Πάρτε τους καθαρισμένους/απολυμασμένους φακούς από τη βάση φακών. Κρατήστε τους με τα δάχτυλά σας και ξεπλύντε και τις δύο πλευρές με το διάλυμα διάλυμα έκπλυσης για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.
 - Na χρησιμοποιείτε πάντα το **cleadew CareSolution** για την έκπλυση των φακών.
 - Αποφύγετε τη χρήση αλατούχων διαλυμάτων ή διαλυμάτων MPS τα οποία περιέχουν χλωριούχο νάτριο ως συντηρητικό ή απολυμαντικό.

ΠΛΥΣΗ ΘΗΚΗΣ ΦΑΚΩΝ

- Αφού ολοκληρωθεί η φροντίδα των φακών, πλύνετε τη θήκη των φακών με **cleadew CareSolution** και αφήστε την να στεγνώσει στον αέρα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΑΚΩΝ

- Αποθηκεύστε τους φακούς σε θερμοκρασία δωματίου μετά την απολύμανση, τον καθαρισμό και την εξουδετέρωση με **cleadew GP**.
- Μην μεταφέρετε το διάλυμα σε άλλη φιάλη ή θήκη.
- Μην ανοίγετε τη θήκη μέχρι να χρησιμοποιήσετε τους φακούς.
- Για να αποθηκεύσετε τους φακούς για 30 ημέρες ή περισσότερο, απολυμαίνετε και καθαρίζετε με **cleadew GP** σύμφωνα με τη διαδικασία απολύμανσης, καθαρισμού και εξουδετέρωσης όπως περιγράφεται παραπάνω κάθε 30 ημέρες.
- Ξεπλύνετε τους φακούς με **cleadew CareSolution** πριν τους φορέσετε σύμφωνα με τη διαδικασία έκπλυσης των φακών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

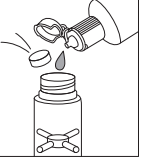
- 
- Για να αποφύγετε σοβαρές οφθαλμικές μολύνσεις ή βλάβες, να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης.
 - Χρησιμοποιήστε μαζί το απολυμαντικό διάλυμα και το δίσκιο εξουδετέρωσης και καθαρισμού.
 - Κλείστε καλά τη φιάλη μετά τη χρήση.
 - Χρησιμοποιείτε πάντα τα εξαρτήματα του συστήματος **GP cleadew**, συμπεριλαμβανομένης της θήκης φακών και **cleadew CareSolution**.
 - Απορρίψτε τυχόν εναπομείναν διάλυμα 90 ημέρες μετά το άνοιγμα της φιάλης.
 - Na μη χρησιμοποιείται για μαλακούς φακούς επαφής.
 - Μην χρησιμοποιείτε το **cleadew CareSolution** για την απολύμανση ή αποθήκευση των φακών.
 - Μην αγγίξετε το ρύγχος της φιάλης για την αποφυγή μόλυνσης.
 - Μην καταπίνετε το διάλυμα ή το δίσκιο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, πείτε αμέσως μεγάλη ποσότητα πόσιμου νερού.
 - Na μη χρησιμοποιείται στο μάτι. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύντε αμέσως το μάτι με μη ρυθμιστικό, αποστειρωμένο αλατούχο διάλυμα ή χρησιμοποιήστε κάποιο παρασκευασμα για οφθαλμικές πλύσεις.
 - Μην χρησιμοποιείτε το δίσκιο εάν έχει φθαρεί ή αποχρωματιστεί.
 - Μην επαναχρησιμοποιείτε το διάλυμα. (Το διάλυμα μετά τη φροντίδα των φακών εξουδετερώνεται και δεν μπορεί να απολυμάνει τους φακούς. Για την αποφυγή μόλυνσης των ματιών, μην επαναχρησιμοποιείτε το διάλυμα).
 - Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης.
 - Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει φιάλη ή η συσκευασία είναι λερωμένη ή φθαρμένη.
 - Μην χρησιμοποιείτε το διάλυμα εάν είναι θαλό ή έχει αποχρωματιστεί.
 - Μην φοράτε φακούς χωρίς να τους ξεπλύνετε με **cleadew CareSolution** μετά την απολύμανση, τον καθαρισμό και την εξουδετέρωση.
 - Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μαζί με άλλο διάλυμα, δίσκιο ή φαρμακευτικό σκεύασμα.
 - Μην χρησιμοποιείτε νερό της βρύσης για να ξεπλύνετε τους φακούς ή τη θήκη των φακών.
- 
- Na φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
 - Μην μεταφέρετε το διάλυμα σε άλλη φιάλη ή θήκη.
 - Για την αποφυγή μόλυνσης, χρησιμοποιείτε μια νέα θήκη φακών με κάθε αγορά.
 - Χρησιμοποιήστε τα δίσκια αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
 - Αφού εξοντλήσετε όλα τα δίσκια εξουδετέρωσης και καθαρισμού, απορρίψτε το υπόλοιπο διάλυμα στη φιάλη.
 - Εάν το διάλυμα προσκολληθεί στα ρούχα σας, πλύνετε αμέσως με νερό.
 -  Ξεπλύνετε το διάλυμα που έχει απομείνει στη βάση πλύσης με νερό μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε τη δημιουργία λεκέδων στην επιφάνεια της βάσης πλύσης.
 - Αποθηκεύστε τα προϊόντα σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία δωματίου, αποφευχόντας το άμεσο ηλιακό φως.
 - Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα όπως πόνο και ερεθισμό στα μάτια, αφαιρέστε αμέσως τους φακούς σας και συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρό σας ή έναν επαγγελματία οφθαλμικής υγείας.
 - Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είστε αλλεργικοί σε κάποιο από τα συστατικά που χρησιμοποιούνται σε αυτό.
 - Μην αλλάζετε το σύστημα φροντίδας φακών επαφής χωρίς να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία οφθαλμικής υγείας σας.
 - Εάν σας τελειώσει το **cleadew CareSolution**, αγοράστε επιπλέον συσκευασίες **cleadew CareSolution**.
 -  Το βορικό οξύ είναι τοξικό για την αναπαραγωγή και μπορεί να μειώσει τη μελλοντική γονιμότητα εάν καταποθεί από παιδιά ή να βλάψει τα μωρά εάν ληφθεί από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Παρότι το παρόν προϊόν περιέχει βορικό οξύ, η ποσότητα βορικού οξέος στο προϊόν είναι σε τέτοια συγκέντρωση που δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία. Το παρόν προϊόν είναι ασφαλέας για χρήση από παιδιά και έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες εάν τηρηθούν οι οδηγίες του προϊόντος. Η ευαισθησία στα χημικά διαφέρει από άτομο σε άτομο. Για άτομα με ευαισθησία, η σύνταση είναι να ξεπλύνετε τον φακό με διάλυμα στειρού φυσιολογικού ορού πριν τον φορέσετε.

Sert gaz geçirgen kontakt lensler için dezenfekte etme, temizleme, durulama ve saklama sistemidir.

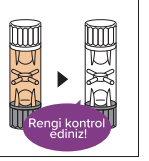
TÜM SERT GAZ GEÇİRGEN KONTAKT LENSLER İÇİNDİR

Kontakt lenslerinizi tutmadan önce ellerinizi yumuşak sabunla iyice yıkayınız.

1 DEZENFEKSİYON, TEMİZLEME VE NÖTRALİZE ETME

- 
- Lensleri kabin lens tutucularına yerleştiriniz.
 - Kabin kapağını bir taraftan kapatın, içine bir nötralize edici ve temizleyici tablet koyunuz ve kutunun %90 kadarını turuncu dezenfeksiyon çözümü ile doldurunuz.
 - Diğer taraftaki kapağı sıkıca kapatınız.
 - Lensleri dört saatten fazla (veya gece boyunca) bekletiniz.
 - Camların ve çözününün temiz olup olmadığını kontrol ediniz.

2 LENSLERİ DURULAMA

- 
- Kapağı bir taraftan açın ve çözümü lens kabına atınız.
 - Temizlenmiş/dezenfekte edilmiş lensleri tutucudan alınız. Parmaklarınızla tutunuz ve her iki tarafını da en az 10 saniye boyunca temiz durulama çözeltisi ile yıkayınız.
 - Δ Lensleri durulamak için her zaman **cleadew CareSolution** kullanınız.
 - Koruyucu veya dezenfektan olarak sodyum klorit içeren salin veya MPS çözünümlarını kullanmaktan kaçınınız.

3 LENS KABINI YIKAMA

- Lenslerin bakımı tamamlandıktan sonra, lens kabını **cleadew CareSolution** ile yıkayınız ve kurumaya bırakınız.

LENSLERİ SAKLAMA

- cleadew GP** ile dezenfekte ettikten, temizledikten ve nötralize ettikten sonra lensleri oda sıcaklığında saklayınız.
- Lensleri kullanana kadar kabi açmayınız.
- Lensleri 30 gün veya daha uzun süre saklamak için, her 30 günde bir yukarıdaki Dezenfeksiyon, Temizleme ve Nötralize etme prosedürüne uygun olarak **cleadew GP** ile dezenfekte ediniz ve temizleyiniz.
- Lensleri takmadan önce lens durulama prosedürüne uygun olarak **cleadew CareSolution** ile durulayınız.

UYARILAR

- 
- Ciddi göz enfeksiyonlarını veya hasarlarını önlemek için her zaman kullanıcı talimatlarına uyunuz.
 - Dezenfeksiyon çözümü ile nötralize edici ve temizleyici tableti birlikte kullanınız.
 - Kullandıktan sonra şişeyi sıkıca kapatınız.
 - Her zaman lens kabi ve **cleadew CareSolution** da dahil olmak üzere **cleadew GP** sistemi bileşenlerini kullanınız.
 -  Şişeyi açtıktan 90 gün sonra kalan çözümü atınız.
 - Yumuşak kontakt lensler için kullanmayınız.
 - Cleadew CareSolution**'i lensleri dezenfekte etmek veya saklamak için kullanmayınız.
 - Kirlenmeyi önlemek için şişenin ucuna dokunmayınız.
 -  Solüzyonu veya tableti yutmayınız. Eğer yutarsanız, hemen bol miktarda içme suyu içiniz.
 - Gözünüzde kullanılmamalıdır. Sayet kullanırsanız, gözünüzü derhal steril salin çözümüyle yıkayınız veya göz doktorunuza veya bir göz bakım pratisyenine danışınız.
 - Çiçinde kullanılan bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa ürünü kullanmayınız.
 - Göz bakım uzmanınıza danışmadan kontakt lens bakım sistemini değiştirmeyiniz.
 - Elimizdeki **cleadew CareSolution** biterse, lütfen ek **cleadew CareSolution** üniteleri satın alınız.
 -  Borik asit üremeye karşı toksiktir ve çocuklar tarafından içilirse gelecekteki doğurganlığı azaltabilir veya hamile veya emziren kadınlar tarafından içilirse bebeklere zarar verebilir. Bu ürün de borik asit içermesine rağmen, bu üründeki borik asit miktarı sağlık açısından tehlike oluşturmayacak bir yoğunluktadır. Bu ürün, ürün talimatlarına uyulduğu sürece çocuklar ve hamile veya emziren kadınlar tarafından güvenli kullanılabilir. Kimyasallara karşı hassasiyet kişiden kişiye farklılık gösterir. Hassas kişilerin lensi takmadan önce steril salin çözümüyle durulamaları tavsiye edilir.
 -  Lensleri veya lens kabını durulamak için musluk suyu kullanmayınız.

BİLEŞENLER

[Dezenfeksiyon çözümü] Povidon-iyot (%0,05)   Borik asit

[Nötralize edici ve temizleyici tablet] Sodyum sülfüt (2,4 mg/tablet),
Proteolitik enzim (8,0 mg/tablet)

[Durulama çözeltisi] Koruyucu olarak hidrojen peroksit (%0,004)   Borik asit

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State of the EU.

OPHTECS Europe B.V.
Marithaime 20, 6662 WD Elst,
The Netherlands
+31 (0)263 54 44 44
info@ophtecs-europe.com

MADE IN JAPAN

	 2797
EC	REP
OPHTECS CORPORATION 5-2-4 Minatojima Minamimachi, Chuo-ku, Kobe, 650-0047 Japan	

www.ophtecs.com

ISSUE DATE: 20230625
REVISE DATE: 0-20230525